

Sonosite MT Guida rapida

Accensione del sistema

Premere il pulsante di accensione ubicato sul davanti del sistema .

Avvio di uno studio

Nuovo paziente

1. Toccare **Invio** dalla schermata di avvio o **+ Nuovo paziente** sul pannello a sfioramento.
2. Immettere le informazioni sul paziente.
3. Toccare **Scansione** per iniziare l'acquisizione di immagini.

Tutti i dati salvati durante lo studio sono collegati al paziente.

Tipi di esame

1. Selezionare il trasduttore e il pulsante di esame.
2. Selezionare un trasduttore e un tipo di esame.
3. Toccare due volte il tipo di esame o toccare **Scansione** per iniziare l'acquisizione di immagini.

Scansione

- La modalità predefinita è 2D. Toccare **2D** per ritornare alla modalità predefinita.
- Toccare **M** per eseguire una scansione in M Mode.
- Toccare **C** per eseguire una scansione in modalità Doppler a colori.
- Toccare **D** per eseguire la scansione in modalità Doppler.

Modo M

1. Posizionare la linea M nell'immagine 2D sul monitor touchscreen.
2. Per visualizzare sia l'immagine della linea M che la traccia della M Mode, toccare di nuovo **M**.
3. Toccare l'immagine o la traccia per alternare i comandi tra queste.

Color Doppler

1. Usare il comando **Tipo colore** per alternare tra Color Velocity (CVD) e Color Power (CPD), oppure CVD e Color Variance (Var), a seconda del tipo di esame. Potrebbe


essere necessario toccare **+ Più controlli** sul pannello a sfioramento per trovare il comando.

2. Posizionare il riquadro del colore trascinandolo sul monitor touchscreen.
3. Per controllare la dimensione del riquadro del colore, toccare e trascinare il cerchio sull'angolo.


Doppler

1. Utilizzare il comando **Mod. Doppler** per commutare fra l'acquisizione di immagini Doppler PW, CW e TDI (CW e TDI sono disponibili solo nell'esame cardiaco). Potrebbe essere necessario toccare **+ Più controlli** per trovare il comando.
2. Posizionare la linea D e il gate nell'immagine 2D sul monitor touchscreen.
3. Per visualizzare la traccia spettrale, toccare nuovamente **D**.
4. Toccare l'immagine o la traccia per alternare i comandi tra queste.

Monitor clinico

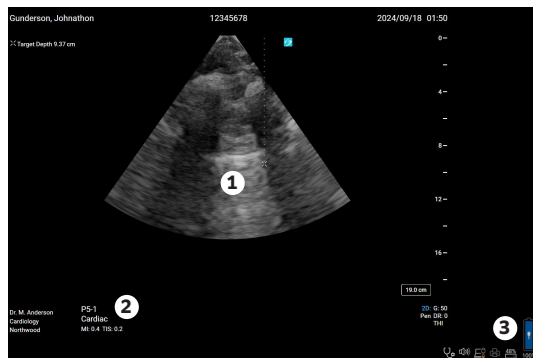

Pannello a sfioramento

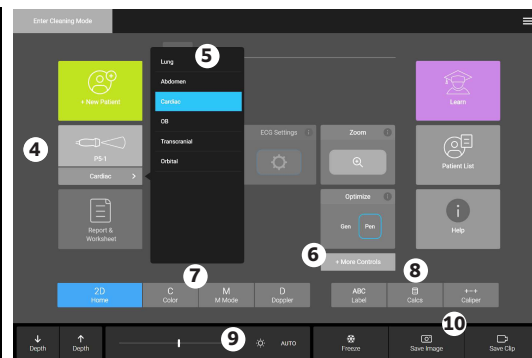

Parte anteriore e posteriore del sistema



Legenda

1. Monitor clinico e touchscreen
2. Tipo esame
3. Livello della batteria e connessioni
4. Studio, paziente e report
5. Menu del tipo di esame del trasduttore
6. Altri comandi
7. Modalità
8. Etichette, calcoli, calibri
9. Comandi del guadagno o cine
10. Pulsanti di salvataggio
11. Pulsante di alimentazione
12. Porte HDMI, ECG, Ethernet e alimentazione

Sonosite MT Guida rapida

Guadagno

Regolare il guadagno effettuando una delle seguenti operazioni:

- Regolare il cursore sul pannello a sfioramento.
- Toccare **AUTO** sul pannello a sfioramento per regolare automaticamente il guadagno.

Profondità

- Utilizzare il cursore sul pannello a sfioramento ↑ toccare ↓ la profondità e i pulsanti.

Blocco, sblocco e uso di cine

1. Toccare il pulsante. Viene visualizzato il display CINE nell'angolo in basso a sinistra del monitor touchscreen.
2. Per scorrere i fotogrammi della cinepresa, trascinare il dito orizzontalmente sul monitor touchscreen verso destra o sinistra per spostarsi avanti o indietro tra i fotogrammi. Per spostarsi fotogramma per fotogramma, toccare o .
3. Per sbloccare, toccare nuovamente il pulsante .

Zoom

Zoom in tempo reale

1. Toccare **Zoom** sul pannello a sfioramento. Potrebbe essere necessario toccare **+ Più controlli** sul pannello a sfioramento per trovare il comando.
2. Posizionare il riquadro dello zoom trascinandolo sul monitor touchscreen.
3. Per controllare la dimensione del riquadro di zoom, toccare e trascinare il cerchio sull'angolo.
4. Toccare nuovamente il comando per eseguire lo zoom.

Zoom bloccato

1. Su un'immagine bloccata, toccare **Zoom** sul pannello a sfioramento. Potrebbe essere necessario toccare **+ Più controlli** sul pannello a sfioramento per trovare il comando.
2. Toccare in alto o in basso sul comando per regolare l'ingrandimento.
3. Eseguire una panoramica dell'immagine sul monitor touchscreen.

Misurazioni e calcoli

Misurazioni

1. Su un'immagine in tempo reale o bloccata, premere il pulsante del calibro .
2. Posizionare i calibri predefiniti sul monitor touchscreen oppure selezionare una misura diversa sempre dal pannello a sfioramento.
3. Toccare un calibro sul monitor touchscreen per passare da un calibro all'altro.

Calcoli

1. Su un'immagine in tempo reale o bloccata, premere il pulsante di calcolo per visualizzare i pacchetti di analisi.
2. Navigare fino a una misurazione nel pannello a sfioramento e selezionarla.
3. Posizionare i calibri sul monitor touchscreen.
4. Toccare un calibro sul monitor touchscreen per passare da un calibro all'altro.

Etichette

1. Toccare **ABC** per visualizzare la pagina di etichettatura.
2. Toccare **Testo**, **Pitto** o **Freccia** per aggiungere testo, pittografie o frecce all'immagine.
3. Posizionare l'etichetta sul monitor touchscreen.

Salvataggio e controllo

- Toccare il pulsante per salvare un'immagine e le misurazioni e i calcoli correnti. I calcoli e le misurazioni associate vengono salvati anche nel report paziente.
- Toccare il pulsante per salvare un filmato.
- Toccare le miniature per accedere alla schermata di controllo oppure toccare **Elenco paz.** per visualizzare uno studio diverso (è possibile trovare questa opzione sul pannello a sfioramento principale, nella parte inferiore del modulo paziente o del modulo report, oppure dal menu .

Chiusura ed esportazione

1. Terminare lo studio toccando **FINE STU**. Non è possibile esportare studi aperti.
2. Inserire un dispositivo di archiviazione USB in una qualsiasi porta USB del sistema o del supporto.
3. Toccare **Elenco paz.** Selezionare uno o più studi da esportare.
4. Toccare **Invia a**, quindi **USB**.
5. Selezionare l'unità USB dall'elenco e scegliere se includere le informazioni sul paziente.
6. Toccare **Esporta**.

Guida e apprendimento

- Toccare un per accedere alla guida integrata oppure toccare **Guida** dal menu di sistema .
- Accedere alla funzionalità Apprendimento per visualizzare i video di formazione e procedurali.

P25660-01



FUJIFILM Sonosite, Inc.

Sede centrale nel mondo
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021-3904
Tel.: +1 (425) 951 1200
oppure +1 (877) 657 8050
Fax: +1 (425) 951 6800
www.sonosite.com

FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Australia. +300 663 516
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Nuova Zelanda. +0800 888 204
FUJIFILM Sonosite Brasile. +55 11 5574 7747
FUJIFILM Sonosite Canada Inc. +1 888 554 5502
FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd. +86 21 5010 6000
FUJIFILM Sonosite GmbH-Germania. +49 69 80 88 40 30
FUJIFILM Sonosite, Inc.- Stati Uniti. +1 425 951 1200

Uffici Sonosite nel mondo

FUJIFILM Sonosite India Pvt Ltd. +91 124 288 1100
FUJIFILM Sonosite Iberica SL - Spagna. +34 91 123 84 51
FUJIFILM Medical Co., Ltd. - Giappone. +81 3 0418 7190
FUJIFILM Sonosite Corea Ltd. +65 6380 5589
FUJIFILM Sonosite Ltd - Regno Unito. +44 1462 341 151
FUJIFILM Sonosite SARL-Francia. +33 182 880 702