

Guida di riferimento rapido

Accensione del sistema

Premere il pulsante di accensione ubicato sul retro del sistema

Avvio di uno studio

Nuovo paziente

- 1 Toccare Invio...Informazioni paziente nella schermata di avvio o + Nuovo paziente sul touchscreen.
 - 2 Immettere le informazioni sul paziente.
 - 3 Toccare Scansione per iniziare l'acquisizione di immagini.
- Tutti i dati salvati durante lo studio sono collegati al paziente.

Tipi di esame


- 1 Selezionare il trasduttore e il pulsante di esame.
- 2 Selezionare un trasduttore e un tipo di esame.
- 3 Toccare due volte il tipo di esame o toccare Scansione per iniziare l'acquisizione di immagini.

Scansione

- La modalità predefinita è 2D. Toccare 2D per tornare alla modalità predefinita.
- Toccare M per eseguire scansioni in M Mode.
- Toccare C per eseguire scansioni in color Doppler.

M Mode

- 1 Sul touchscreen, posizionare la linea M nell'immagine 2D.
- 2 Per visualizzare sia la linea-M sia la traccia, toccare nuovamente M.
- 3 Toccare l'immagine o la traccia per alternare i comandi tra queste.

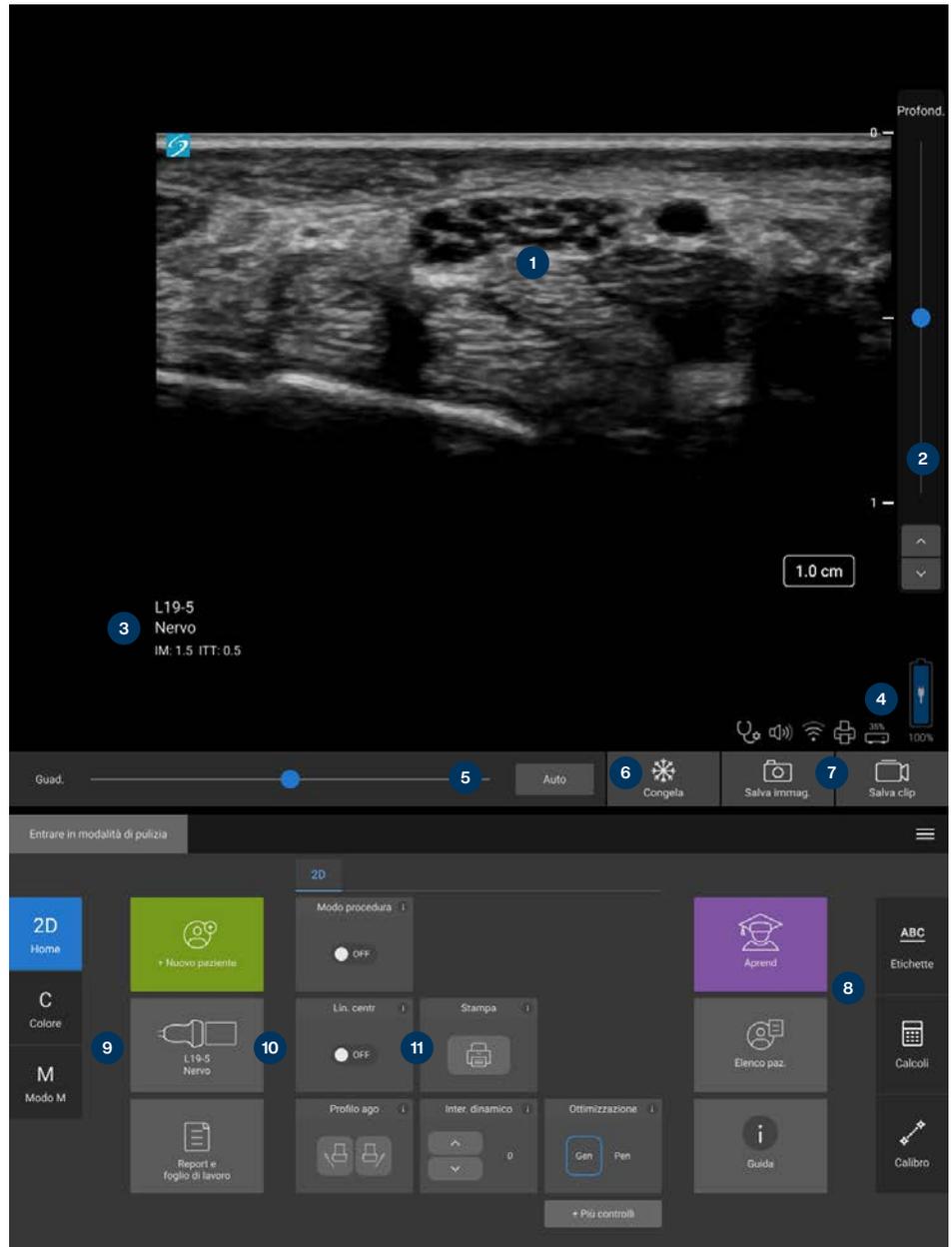

Chiave:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Monitor clinico e touchscreen 2 Controlli di Profondità 3 Tipo esame 4 Livello della batteria e connessioni 5 Comandi del guadagno o cine 6 Bloccare | <ul style="list-style-type: none"> 7 Pulsanti di salvataggio 8 Etichette, calcoli, calibri 9 Modalità 10 Selettore di pazienti, trasduttori ed esami, report e fogli di lavoro 11 Più comandi |
|---|--|

Guida di riferimento rapido

Guadagno

Regolare il guadagno effettuando una delle seguenti operazioni:

- Regolare il cursore sul touchscreen.
- Toccare Auto per regolare automaticamente il guadagno.

Profondità

- Utilizzare i pulsanti di profondità su/giù sul lato destro del touchscreen.

Blocco, sblocco e uso di cine

- 1 Toccare . I comandi CINE appaiono a sinistra dell'icona.
- 2 Trascinare il dito orizzontalmente sul touchscreen a destra o a sinistra per spostarsi avanti o indietro attraverso i fotogrammi cine. Per spostarsi fotogramma per fotogramma, toccare le frecce direzionali.
- 3 Per sbloccare, toccare nuovamente .

Zoom

Zoom in tempo reale

- 1 Toccare Zoom sul touchscreen.
- 2 Posizionare il riquadro dello zoom trascinando il dito sul touchscreen.
- 3 Per controllare la dimensione del riquadro di zoom, toccare e trascinare il cerchio sull'angolo.
- 4 Toccare nuovamente il comando per eseguire lo zoom.

Zoom bloccato

- 1 Toccare .
- 2 Toccare in alto o in basso sul comando di zoom per regolare l'ingrandimento.
- 2 Eseguire una panoramica dell'immagine sul touchscreen.

Misurazioni e calcoli

Misurazioni

- 1 Su un'immagine in tempo reale o bloccata, toccare Calibro .
- 2 Utilizzare le estremità dei calibri per posizionarli o selezionare una misurazione diversa.

Calculations

- 1 Su un'immagine in tempo reale o bloccata, toccare Calcoli per visualizzare i pacchetti di analisi.
- 2 Accedere e selezionare una misurazione sul touchscreen.
- 3 Accedere e selezionare una misurazione sul touchscreen.

Etichette

- 1 Toccare ABC per visualizzare la pagina di etichettatura.
- 2 Toccare Testo, Pitto o Freccia per aggiungere testo, pittografie o frecce all'immagine.
- 3 Utilizzare il tastierino per posizionare l'etichetta.

Salvataggio e controllo

- Toccare per salvare un'immagine e le misurazioni e i calcoli correnti. I calcoli e le misurazioni associate vengono salvati anche nel report paziente.
- Toccare per salvare una clip.
- Toccare le miniature per accedere alla schermata di controllo oppure toccare Elenco paz. per visualizzare uno studio diverso.

(Questa opzione è riportata sul touchscreen, nella parte inferiore del modulo paziente o report, oppure nel menu.)

Chiusura ed esportazione

- 1 Terminare lo studio toccando FINE STU. Non è possibile esportare studi aperti.
- 2 Inserire un dispositivo di archiviazione USB in una qualsiasi porta USB del sistema o del supporto.
- 3 Toccare Elenco paz. Selezionare uno o più studi da esportare.
- 4 Toccare Invia a, quindi USB.
- 5 Selezionare l'unità USB dall'elenco e scegliere se includere le informazioni sul paziente.
- 6 Toccare Esporta.

Guida e apprendimento

- Toccare per accedere alla guida integrata e alla guida utente del sistema.
- Accedere alla funzionalità Apprend. per visualizzare i video di formazione e procedurali.

P31259-03



CE
2797

FUJIFILM SONOSITE
Value from Innovation

FUJIFILM Sonosite, Inc.

Sede centrale mondiale
21919 30th Drive SE, Bothell, WA 98021-3904
Tel: +1 (425) 951 1200 or +1 (877) 657 8050
Fax: +1 (425) 951 6800
www.sonosite.com

Uffici Sonosite nel mondo

FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Australia 300 663 516
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Nuova Zelanda 0800 888 204
FUJIFILM Sonosite Brazil +55 11 5574 7747
FUJIFILM Sonosite Canada Inc. +1 888 554 5502
FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd +86 21 5010 6000
FUJIFILM Sonosite GmbH-Germania +49 69 80 88 40 30
FUJIFILM Sonosite, Inc.-Stati Uniti +1 425 951 1200

FUJIFILM Sonosite India Pvt Ltd +91 124 288 1100
FUJIFILM Sonosite Iberica SL-Spagna +34 91 123 84 51
FUJIFILM Medical Co., Ltd.-Giappone +81 3 0418 7190
FUJIFILM Sonosite Korea Ltd +65 6380 5589
FUJIFILM Sonosite Ltd-Regno Unito +44 1462 341 151
FUJIFILM Sonosite SARL-Francia +33 182 880 702