

Sonosite iLOOK Quick Guide

Charging the system

Charge the system before using it. Battery charging completes within four hours.

- 1. Make sure that the AC power cord is connected to the power brick and that the cable on the other end of the brick is connected to the connector on the back of the system.
- 2. Plug the AC power cord into a hospital-grade AC mains outlet.
- 3. Insert the transducer into the transducer holder with the label side facing the back of the holder where the wireless charger is located.

Turning the system on and off

- To turn on the display, press and hold the power button located on the back until the screen lights up.
- To turn on the transducer, press and hold the power button located on the bottom of the transducer. The power indicator flashes blue.
- To turn off the display, press and hold the power button. Tap **Power Off** when the selection screen appears.
- To turn off the transducer, press and hold the power button for three seconds.

Logging into the system

- 1. Enter your login credentials on the login page or select **Guest mode**.

After logging into the system, the home screen appears.

- 2. Select **Scan** to enter scan mode, **Help** to access the user guide, or **Settings** to configure the system.

Starting an exam

Scan mode allows you to connect to the transducer, enter patient information, and perform exams.

Connecting the transducer

- 1. Make sure that both the transducer and the display device are on.
- 2. To connect to a transducer for the first time, tap the system menu on the scan screen.
- 3. In the system menu, tap **Connect to transducer**.
- 4. Tap **Add transducer**, then tap the transducer's serial number in the list.
- 5. After connection, the transducer's indicator light turns green (if the battery is charged), and the scan screen appears.

Entering patient information

- 1. Tap the patient information text field at the top of the screen to enter the patient information screen.
- 2. On the patient information screen, tap each field and enter the name, ID, date of birth, and gender.

All data saved during the study are linked to the patient.

Selecting an exam type


- 1. At the top of the screen, tap on the exam type field to display a drop-down menu.
- 2. Select an exam type from the menu.

Scanning

- 2D is the default mode. Tap **2D** to return to the default mode.
- Tap **C** to scan in Color Doppler.
- To freeze the image, tap .

Color Doppler


- To select the position of the color box on the screen, tap , , or . You can also directly drag the box up or down to those positions.
- Tap to display the imaging control panel, then do one of the following:
 - To switch the color type, tap **CVD** (Color Velocity Doppler) or **CPD** (Color Power Doppler).
 - To steer the color box, tap , , or .
 - To adjust the color scale, tap **Low**, **Med**, or **High**.

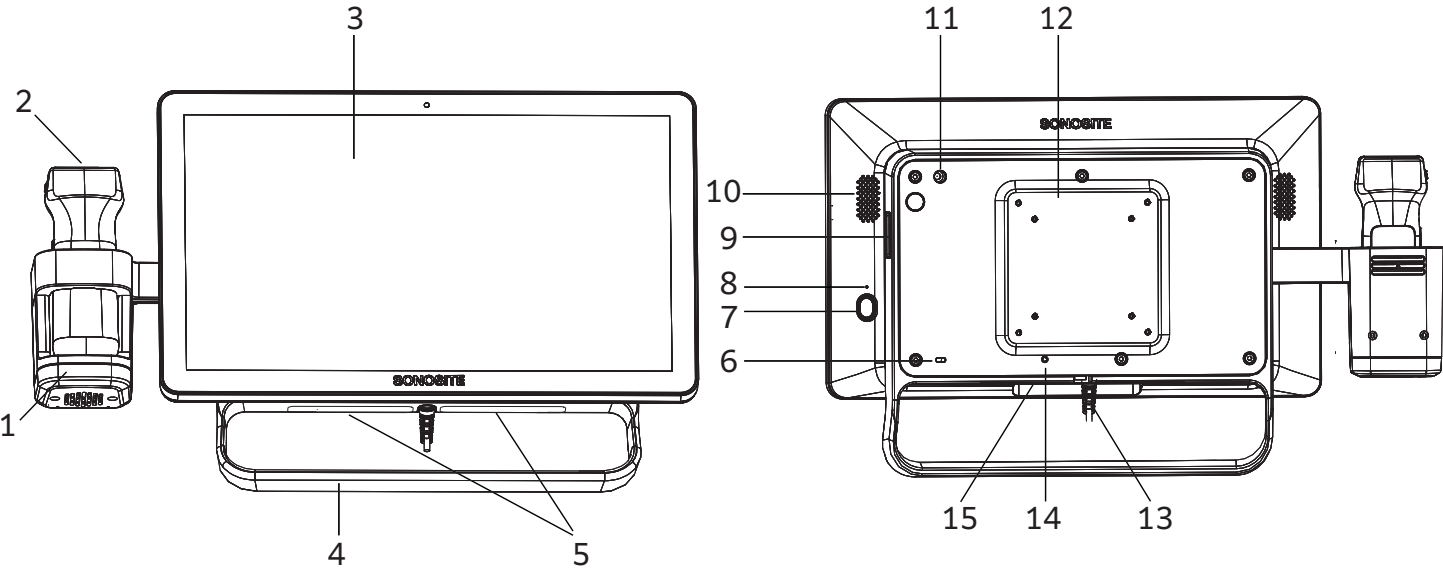

- | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Transducer holder with built-in charger and fan | 4. System handle | 7. Power button | 10. System speaker | 13. Cable connector |
| 2. Transducer | 5. System label | 8. Reset button | 11. Accessory port | 14. Charge indicator |
| 3. Clinical display with touchscreen | 6. Kensington security slot | 9. USB port | 12. VESA interface | 15. System microphone |

Sonosite iLOOK Quick Guide

Main scan screen

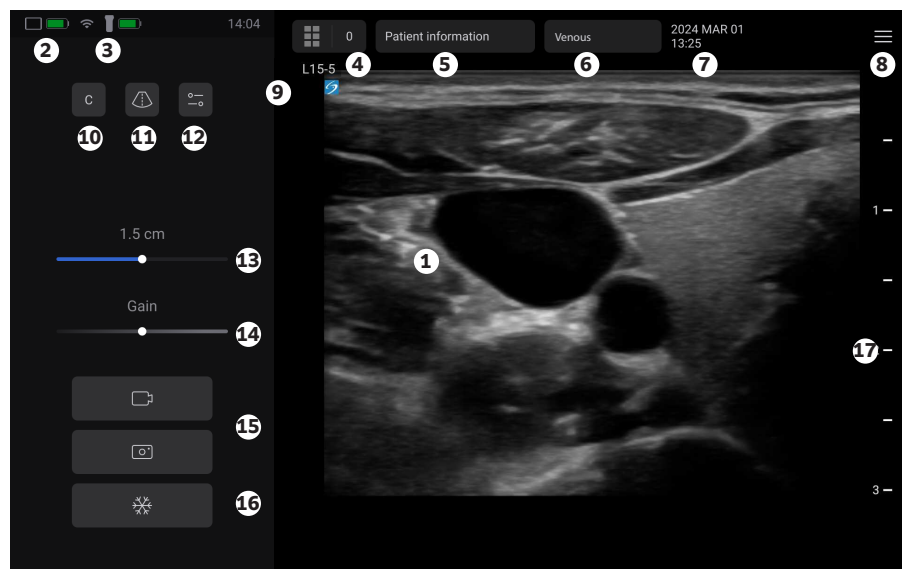

1. Ultrasound image
2. Battery level of the display
3. Transducer connection status and battery level
4. Review button
5. Patient information
6. Exam type selection
7. Date and time
8. System menu
9. Orientation marker
10. Imaging modes
11. Centerline
12. Imaging control panel
13. Depth control
14. Gain or cine controls
15. Save buttons
16. Freeze
17. Depth marker

Adjusting depth, gain, and zoom

- To decrease or increase the depth, move the slider back and forth on the touchscreen.
- To decrease or increase the gain, move the slider back and forth on the touchscreen. When scanning in color, the gain slider adjusts the color gain.
- Adjust the zoom by pinching out or in on the touchscreen. You can double-tap the image to return to the original image size.

Measurements and calculations

Freeze the image  before completing a measurement or calculation.

- To take a distance measurement, tap  and adjust the calipers on the touchscreen.
- To calculate CVR (catheter to vessel ratio), tap **Vessel D (Fr)** or **Vessel D (G)**, use

the calipers to measure the diameter, then select the catheter size from the drop-down menu.

- To delete a measurement, tap  or  **All**.

Saving and reviewing

- Tap  to save an image with any current measurements displayed.
- Tap  to save a clip. Clips can only be saved on live images.
- To review images and clips for the current exam, tap  at the top of the screen then tap any thumbnail to display a full-size version.
- To view images and clips from a past exam, tap the menu  and then tap **Patient list**. Tap  to display the search screen, enter

the patient ID, name, or exam date and tap  to search the list. Tap the desired exam to display the review page.

Ending and exporting

- To end the exam while scanning, tap the **End study** button at the top right of the screen.
- To end the exam from another screen, tap the system menu  then tap **End study**.
- To export data to a USB, navigate to the **Patient list**, select the exam and tap **Send to** then **USB**. Select the check box to remove patient data before exporting.



www.sonosite.com/contactus

Copyright © 2026 FUJIFILM SonoSite, Inc. All rights reserved.

Part number: P33249-02

06/2026

SONOSITE and the SONOSITE logo are trademarks and registered trademarks of FUJIFILM Sonosite in various jurisdictions. FUJIFILM is a registered trademark of FUJIFILM Corporation in various jurisdictions. All other trademarks are the property of their respective owners.

Sonosite iLOOK Guide rapide

Recharge de l'échographe

Rechargez l'échographe avant de l'utiliser. La recharge complète de la batterie prend quatre heures ou moins.

1. Assurez-vous que le câble d'alimentation secteur est bien branché au transformateur et que le câble sortant de l'extrémité opposée du transformateur est branché à la prise à l'arrière de l'échographe.
2. Branchez le câble d'alimentation secteur sur une prise de courant conforme aux normes hospitalières.
3. Mettez la sonde sur son support, avec l'étiquette dirigée vers l'arrière du support, où se trouve le chargeur sans fil.

Mise sous/hors tension de l'échographe

- Pour allumer l'affichage, maintenez le bouton d'alimentation situé à l'arrière enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- Pour allumer la sonde, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation situé au bas de celle-ci. Le voyant d'alimentation clignote en bleu.
- Pour éteindre l'affichage, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Appuyez sur **Power Off** (Éteindre) lorsque l'écran de sélection s'affiche.
- Pour éteindre la sonde, maintenez son bouton d'alimentation enfoncé pendant trois secondes.

Connexion au système

1. Saisissez vos identifiants de connexion sur la page de connexion ou sélectionnez le **mode Invité** (Guest).
Après votre connexion à l'échographe, l'écran d'accueil s'affiche.

2. Sélectionnez **Balayer** (Scan) pour passer en mode balayage, **Guides** (Help) pour accéder aux guides utilisateur, ou **Paramètres** (Settings) pour configurer le système.

Démarrage d'un examen

Le mode Balayage vous permet de vous connecter à la sonde, d'entrer des informations sur le patient et de réaliser des examens.

Connexion de la sonde

1. Assurez-vous que la sonde et le dispositif d'affichage sont tous deux sous tension.
2. Pour vous connecter à une sonde pour la première fois, appuyez sur le menu système  depuis l'écran de balayage.
3. Dans la touche de menu système, appuyez sur **Connect to transducer** (Connexion à la sonde).
4. Appuyez sur **Add transducer** (Ajouter une sonde), puis sur le numéro de série de la sonde dans la liste.
5. Après la connexion, le voyant lumineux de la sonde devient vert (si la batterie est chargée), et l'écran de balayage apparaît.

Saisie des informations patient

1. Appuyez sur le champ de texte des informations du patient en haut de l'écran pour accéder à l'écran des informations du patient.
2. Sur l'écran des informations du patient, appuyez sur chaque champ et saisissez le nom, l'identifiant, la date de naissance et le sexe.

Toutes les données enregistrées au cours de l'examen sont liées au patient.

Sélection d'un type d'examen


1. Touchez le champ du type d'examen au sommet de l'écran pour afficher son menu déroulant.
2. Sélectionnez un type d'examen dans le menu.

Balayage

- Le mode 2D est le mode par défaut. Appuyez sur **2D** pour revenir au mode par défaut.
- Appuyez sur **C** pour activer le mode Doppler couleur.
- Pour figer l'image, appuyez sur .

Doppler couleur


- Pour sélectionner la position de la boîte de couleur sur l'écran, appuyez sur , , ou . Vous pouvez également faire directement glisser la boîte vers le haut ou le bas pour atteindre ces positions.
- Appuyez sur  pour afficher le panneau de contrôle de l'imagerie, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour changer de type de couleur, appuyez sur **CVD** (Doppler couleur vitesse) ou **CPD** (Doppler couleur puissance).
 - Pour orienter la zone de couleur, tapez sur , , ou .
 - Pour régler l'échelle des couleurs, appuyez sur **Low** (Bas), **Med** (Moyen) ou **High** (Haut).

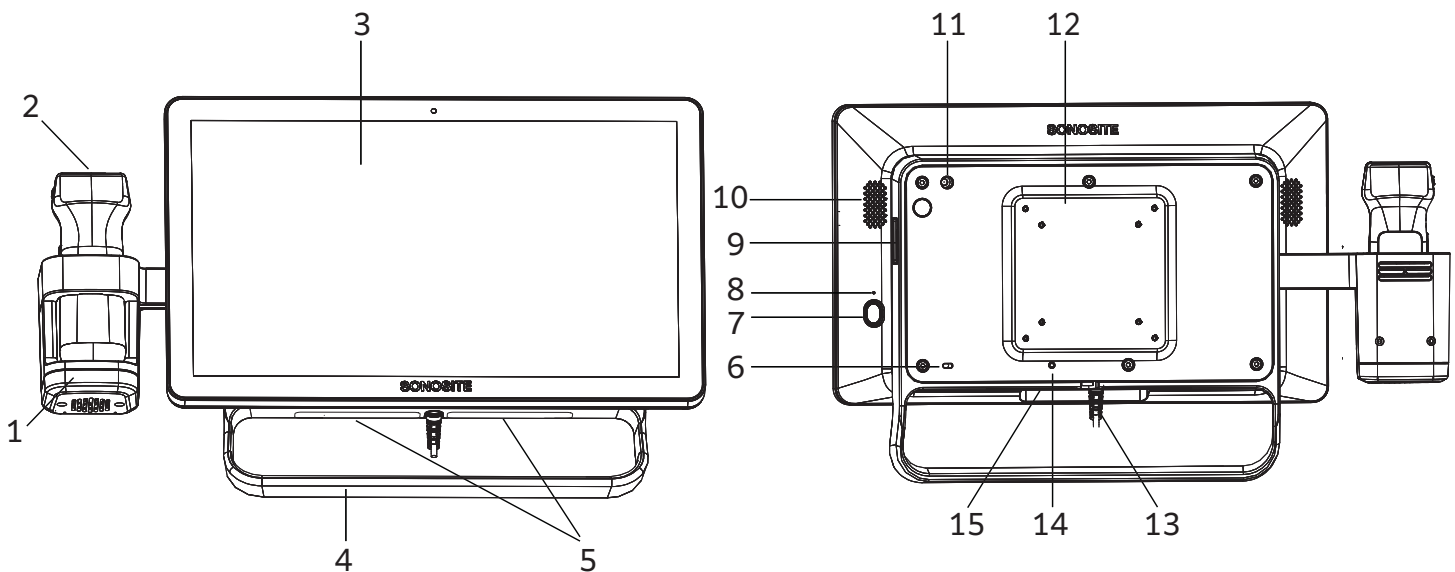

- | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Support de sonde avec chargeur et ventilateur intégrés | 4. Poignée de l'échographe | 7. Bouton d'alimentation | 10. Haut-parleur de l'échographe | 13. Prise de câble |
| 2. Sonde | 5. Étiquette de l'échographe | 8. Bouton de réinitialisation | 11. Port pour accessoires | 14. Indicateur de charge |
| 3. Affichage clinique à écran tactile | 6. Fente de sécurité Kensington | 9. Port USB | 12. Interface VESA | 15. Microphone de l'échographe |

Sonosite iLOOK Guide rapide

Écran principal de balayage

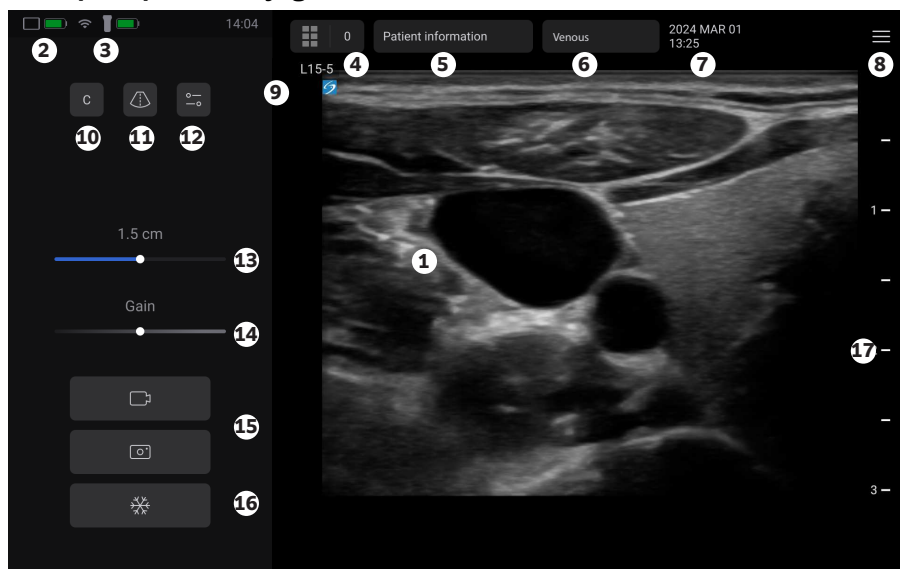

1. Image échographique
2. Niveau de batterie de l'écran
3. État de la connexion et niveau de batterie de la sonde
4. Bouton de revue
5. Informations du patient
6. Sélection de type d'examen
7. Date et heure
8. Menu de l'échographe
9. Marqueur d'orientation
10. Modes d'imagerie
11. Ligne centrale
12. Panneau de commande de l'imagerie
13. Contrôle de profondeur
14. Commandes de gain ou de ciné
15. Boutons d'enregistrement
16. Figér
17. Marqueur de profondeur

Réglage de la profondeur, du gain et du zoom

- Utilisez le curseur sur l'écran tactile pour augmenter ou réduire la profondeur.
 - Utilisez le curseur sur l'écran tactile pour augmenter ou réduire le gain.
- Lors du balayage en couleur, le curseur de gain permet de régler le gain de la couleur.
- Ajustez le zoom en pinçant l'écran tactile vers l'avant ou vers l'arrière. Vous pouvez appuyer deux fois sur l'image pour la remettre à sa taille initiale.

Mesures et calculs

Figér l'image  avant d'effectuer une mesure ou un calcul.

- Pour mesurer une distance, appuyez sur  et réglez le curseur de mesure sur l'écran tactile.
- Pour calculer le CVR (rapport cathéter-vaisseau), tapez sur **Vessel D (Fr)** ou **Vessel D (G)**, utilisez le curseur de mesure pour mesurer le diamètre, puis

sélectionnez la taille du cathéter dans le menu déroulant.

- Pour supprimer une mesure, touchez  ou sur **All** (Tous).

Enregistrement et revue

- Appuyez sur  pour enregistrer une image avec toutes les mesures actuelles affichées.
- Appuyez sur  pour enregistrer un clip. Les clips peuvent uniquement être enregistrés sur des images en direct.
- Pour revoir les images et les clips de l'examen en cours, appuyez sur  en haut de l'écran, puis appuyez sur n'importe quelle vignette pour afficher une version en plein écran.
- Pour voir les images et clips d'un examen antérieur, appuyez sur le menu  puis la **Patient list** (Liste des patients). Appuyez sur  pour afficher l'écran de recherche,

saisissez l'identifiant du patient, son nom ou la date de l'examen et appuyez sur  pour effectuer une recherche dans la liste. Appuyez sur l'examen désiré pour afficher la page de revue.

Fin et exportation

- Pour terminer l'examen en cours de balayage, appuyez sur le bouton **End study** (Terminer l'examen) situé en haut à droite de l'écran.
- Pour terminer l'examen à partir d'un autre écran, appuyez sur le menu système  puis appuyez sur **End Study** (Terminer l'examen).
- Pour exporter des données vers une clé USB, accédez à la **liste des patients**, appuyez sur **Export** (Exporter) puis sur **USB**, et sélectionnez les examens que vous souhaitez exporter. Cochez la case pour retirer les données patient avant l'exportation.



www.sonosite.com/contactus

Copyright © 2026 FUJIFILM SonoSite, Inc. Tous droits réservés.

Référence :P33249-02

06/2026

SONOSITE, le logo SONOSITE et le slogan « Tous les patients. N'importe où. N'importe quand. » sont des marques ou marques déposées de FUJIFILM SonoSite sous diverses juridictions. FUJIFILM est une marque déposée de FUJIFILM Corporation dans diverses juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Sonosite iLOOK Snelstartgids

Het systeem opladen

Laad het systeem op voordat u het gebruikt. Het opladen van de batterij is binnen vier uur voltooid.

1. Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten op de voedingsadapter en dat de kabel aan het andere uiteinde van de voedingsadapter is aangesloten op de connector aan de achterkant van het systeem.
2. Steek het netsnoer in een stopcontact van ziekenhuiskwaliteit.
3. Plaats de transducer in de transducerhouder met de labelzijde naar de achterkant van de houder gericht waar de draadloze oplader zich bevindt.

Het systeem in- en uitschakelen

- Om het display in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop aan de achterkant ingedrukt totdat het scherm oplicht.
- Om de transducer in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop aan de onderkant van de transducer ingedrukt. De stroomindicator knippert blauw.
- Om het display uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt. Tik op **Power Off** (Uitschakelen) wanneer het selectiescherm verschijnt.
- Om de transducer uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt.

Inloggen in het systeem

1. Voer uw inloggegevens in op de inlogpagina of selecteer **Guest mode** (Gastmodus).

Na het inloggen op het systeem verschijnt het startscherm.

2. Selecteer **Scan** om de scanmodus te openen, **Help** om de gebruikersgids te openen of **Settings** (Instellingen) om het systeem te configureren.

Een onderzoek starten

In de scanmodus kunt u verbinding maken met de transducer, patiëntgegevens invoeren en onderzoeken uitvoeren.

De transducer aansluiten

1. Zorg ervoor dat zowel de transducer als het displayapparaat zijn ingeschakeld.
2. Als u voor de eerste keer verbinding wilt maken met een transducer, tikt u op het systeemmenu  op het scanscherm.
3. Tik in het systeemmenu op **Connect to transducer** (Verbinding maken met transducer).
4. Tik op **Add transducer** (Transducer toevoegen) en tik daarna op het serienummer van de transducer in de lijst.
5. Na de verbinding brandt het indicatielampje van de transducer groen (als de batterij is opgeladen) en verschijnt het scanscherm.

Patiëntgegevens invoeren

1. Tik op het tekstveld voor patiëntgegevens bovenaan het scherm om naar het scherm met patiëntgegevens te gaan.
2. Tik in het scherm met patiëntgegevens op elk veld en voer de naam, het ID-nummer, de geboortedatum en het geslacht in.

Alle gegevens die tijdens het onderzoek worden opgeslagen, worden aan de patiënt gekoppeld.

Een onderzoekstype selecteren:


1. Tik bovenaan het scherm op het veld voor het onderzoekstype om een keuzemenu weer te geven.
2. Selecteer een onderzoekstype in het menu.

Scannen

- 2D is de standaardmodus. Tik op **2D** om terug te gaan naar de standaardmodus.
- Tik op **C** om in Kleuren-Doppler te scannen.
- Druk op  om het beeld stil te zetten.

Kleuren-Doppler


- Tik om de positie van het kleurenvak op het scherm te selecteren op ,  of . U kunt het vakje ook direct naar die posities slepen.
- Tik op  om het bedieningspaneel voor beeldweergave te openen, voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
 - Om het kleurtipe te wijzigen, tikt u op **CVD** (Color Velocity Doppler) of **CPD** (Color Power Doppler).
 - Om het kleurenvak te sturen, tik op ,  of .
 - Tik om de kleurenschaal bij te stellen op **Low** (Laag), **Med** (Gemiddeld) of **High** (Hoog).

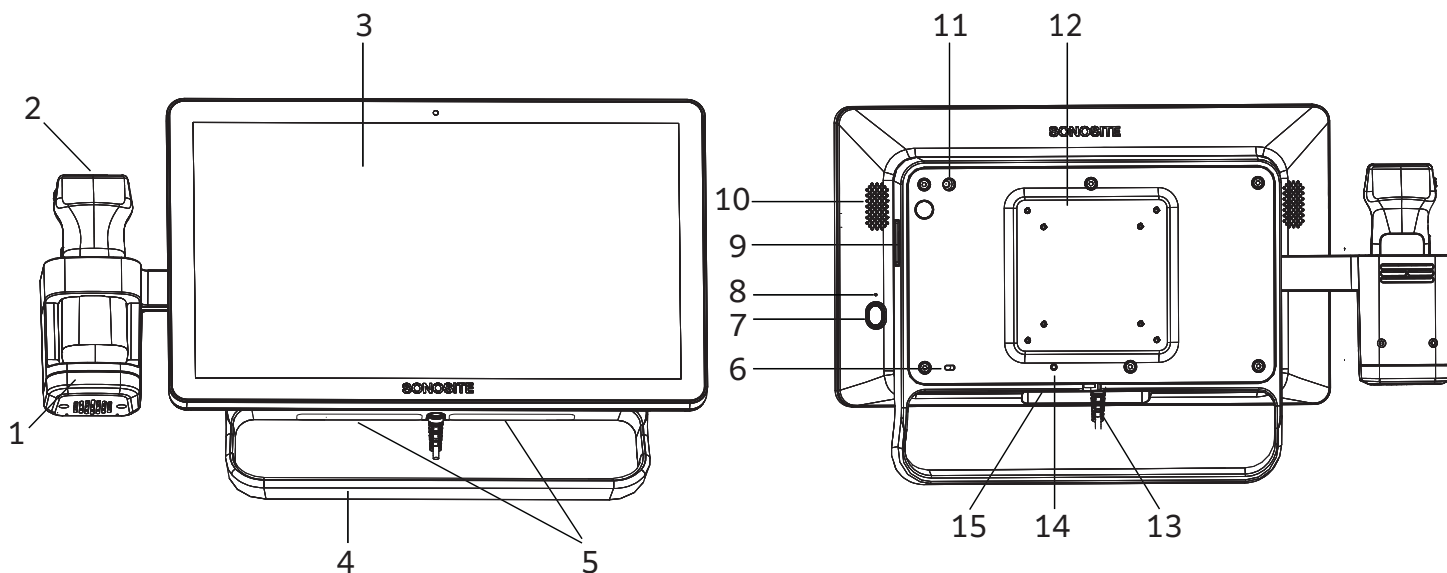

- | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 1. Transducerhouder met ingebouwde oplader en ventilator | 4. Handgreep systeem | 7. Aan/uit-knop | 10. Systeemluidspreker | 13. Kabelconnector |
| 2. Transducer | 5. Systeemlabel | 8. Reset-knop | 11. Accessoirepoort | 14. Laadindicator |
| 3. Klinisch display met aanraakscherm | 6. Kensington-beveiligingssleuf | 9. USB-poort | 12. VESA-interface | 15. Systeemmicrofoon |

Sonosite iLOOK Snelstartgids

Hoofdscherm

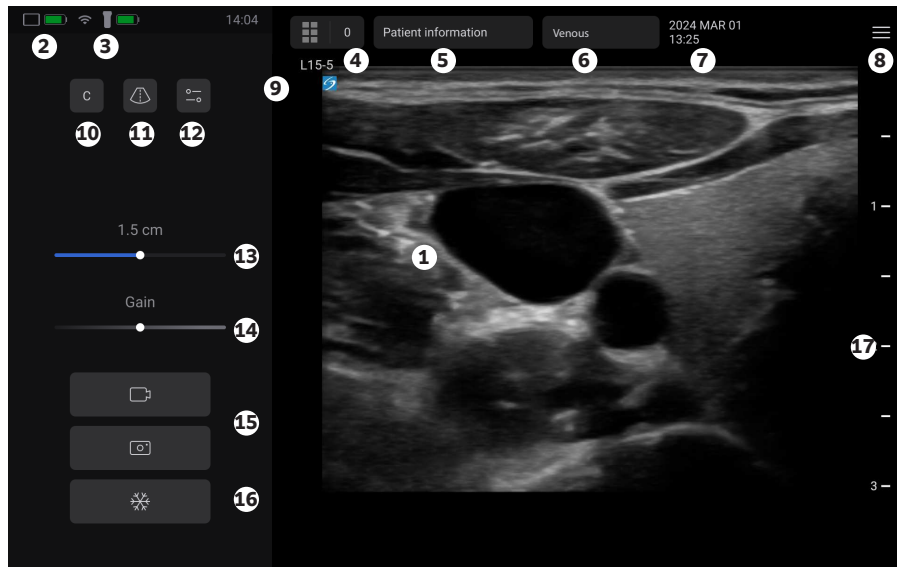

1. Ultrasoon beeld
2. Batterijniveau van het display
3. Verbindingsstatus en batterijniveau van de transducer
4. Beoordelingsknop
5. Patiëntinformatie
6. Selectie van het onderzoekstype
7. Datum en tijd
8. Systeemmenu
9. Oriëntatiemarkeerder
10. Beeldvormingsmodi
11. Middenlijn
12. Bedieningspaneel beeldvorming
13. Diepteregeling
14. Bedieningselementen voor versterking of cine
15. 'Opslaan'-knoppen
16. Stilzetten
17. Dieptemarkering

Diepte, versterking en zoom aanpassen

- Als u de diepte wilt verkleinen of vergroten, beweegt u de schuifregelaar heen en weer op het touchscreen.
- Beweeg de schuifregelaar op het aanraakscherm naar achteren of voren om de versterking te vergroten of te verkleinen. Bij het scannen in kleur regelt de schuifregelaar voor versterking de kleurversterking.
- Pas de zoom aan door op het aanraakscherm twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe te bewegen. Door dubbel op het beeld te tikken, kunt u terugkeren naar het oorspronkelijke beeldformaat.

Metingen en berekeningen

Zet het beeld stil  voordat u een meting of berekening voltooit.

- Om een afstand te meten, tik op  en stel de schuifmaten in via het aanraakscherm.
- Om de CVR (verhouding katheter-vat) te berekenen, tik op **Vessel D (Fr)** of **Vessel D**

(G), meet de diameter met de schuifmaat en selecteer vervolgens de het formaat van de katheter in het uitklapmenu.

- Om een meting te verwijderen, tik op  of  **All** (Alle).

Opslaan en bekijken

- Tik op  om een beeld met de huidige metingen op te slaan.
- Tik op  om een clip op te slaan. Clips kunnen alleen worden opgeslagen op livebeelden.
- Om beelden en clips voor het huidige onderzoek te bekijken, tikt u op  bovenaan het scherm en tikt u vervolgens op een willekeurige miniatuur voor de weergave van een volledige versie.
- Als u afbeeldingen en clips van een eerder onderzoek wilt bekijken, tikt u op het menu  en vervolgens op **Patient**

list (Patiëntenlijst). Tik op  om het zoekscherm weer te geven, voer de patiënt-ID, naam of onderzoeksdatum in en tik op  om in de lijst te zoeken. Tik op het gewenste onderzoek om de beoordelingspagina weer te geven.

Afronden en exporteren

- Tik op de knop **End study** (Studie beëindigen) in de rechterbovenhoek van het scherm om het onderzoek tijdens het scannen te beëindigen.
- Om het onderzoek vanaf een ander scherm te beëindigen, tikt je u op het systeemmenu  en tikt u vervolgens op **End study** (Studie beëindigen).
- Om gegevens naar een USB-stick te exporteren, gaat u naar de **Patiëntenlijst**, selecteert u het onderzoek en tikt u op **Send to** (Verzenden naar) en vervolgens op **USB**. Vink het selectievakje aan voor het verplaatsen van patiëntgegevens alvorens te exporteren.



www.sonosite.com/contactus

Copyright © 2026 FUJIFILM SonoSite, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Onderdeelnummer: P33249-02

06/2026

SONOSITE en het SONOSITE-logo zijn handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van FUJIFILM Sonosite in verschillende rechtsgebieden. FUJIFILM is een gedeponeerd handelsmerk van FUJIFILM Corporation in verschillende rechtsgebieden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Sonosite iLOOK Snabbguide

Ladda systemet

Ladda systemet före användning.

Batteriladdning slutförs inom fyra timmar.

1. Se till att strömkabeln är ansluten till nätaggregatet och att kabeln i andra änden av nätaggregatet är ansluten till kontakten på baksidan av systemet.
2. Anslut strömkabeln till ett nätuttag av sjukhuskvalitet.
3. Sätt in transduktorn i transduktorhållaren med etikettsidan vänd mot baksidan av hållaren där den trådlösa laddaren är placerad.

Starta och stänga av systemet

- För att slå på bildskärmen, tryck och håll ned strömbrytaren på baksidan tills skärmen tänds.
- För att slå på transduktorn, tryck och håll ned strömbrytaren på undersidan av transduktorn. Strömindikatorn blinkar blått.
- För att stänga av bildskärmen, tryck och håll ned strömbrytaren. Tryck på **Power Off** (Stäng av) när valskärmen visas.
- För att stänga av transduktorn, tryck och håll ned strömbrytaren i tre sekunder.

Inloggning på systemet

1. Ange dina inloggningsuppgifter på inloggningssidan eller välj **Guest mode** (Gästläge). Efter att du har loggat in i systemet visas startskärmen.

2. Välj **Scan** (Skanna) för att gå till skanningsläge, **Help** (Hjälp) för att komma till användarhandboken eller **Settings** (Inställningar) för att konfigurera systemet.

Starta en undersökning

I skanningsläget kan du ansluta till transduktorn, ange patientinformation och utföra undersökningar.

Anslutning av transduktor

1. Kontrollera att både transduktorn och bildskärmsenheten är påslagna.
2. För att ansluta till en transduktor för första gången trycker du på systemmenyn  på skanningsskärmen.
3. Tryck på **Connect to transducer** (Anslut till transduktor) i systemmenyn.
4. Tryck på **Add transducer** (Lägg till transduktor) och tryck sedan på transduktorns serienummer i listan.
5. Efter anslutningen lyser transduktorns indikatorlampa grön (om batteriet är laddat) och skanningsskärmen visas.

Ange patientdata

1. Tryck på textfältet för patientinformation längst upp på skärmen för att öppna skärmen för patientinformation.
2. På skärmen med patientinformation trycker du på varje fält och anger namn, ID, födelsedatum och kön.

Alla data som sparas under studien länkas till patienten.

Välja en undersökningstyp


1. Överst på skärmen trycker du på fältet för undersökningstyp för att visa en rullgardinsmeny.
2. Välj undersökningstyp i menyn.

Skanning

- Utgångsläget är 2D. Tryck på **2D** för att återgå till standardläget.
- Tryck på **C** för att skanna i färgdoppler.
- För att frysa en bild, tryck på .

Color Doppler (Färgdoppler)


- Om du vill välja färgrutans position på skärmen trycker du på ,  eller . Du kan även dra rutan direkt uppåt eller nedåt till dessa positioner.
- Tryck på  för att visa kontrollpanelen för bildåtergivning och gör sedan något av följande:
 - Om du vill byta färgtyp trycker du på **CVD** (Color Velocity Doppler, (Färghastighetsdoppler)) eller **CPD** (Color Power Doppler, (Energidoppler)).
 - För att styra färgrutans trycker du på ,  eller .
 - För att justera färgskalan trycker du på **Low** (Låg), **Med** (Medel) eller **High** (Hög).

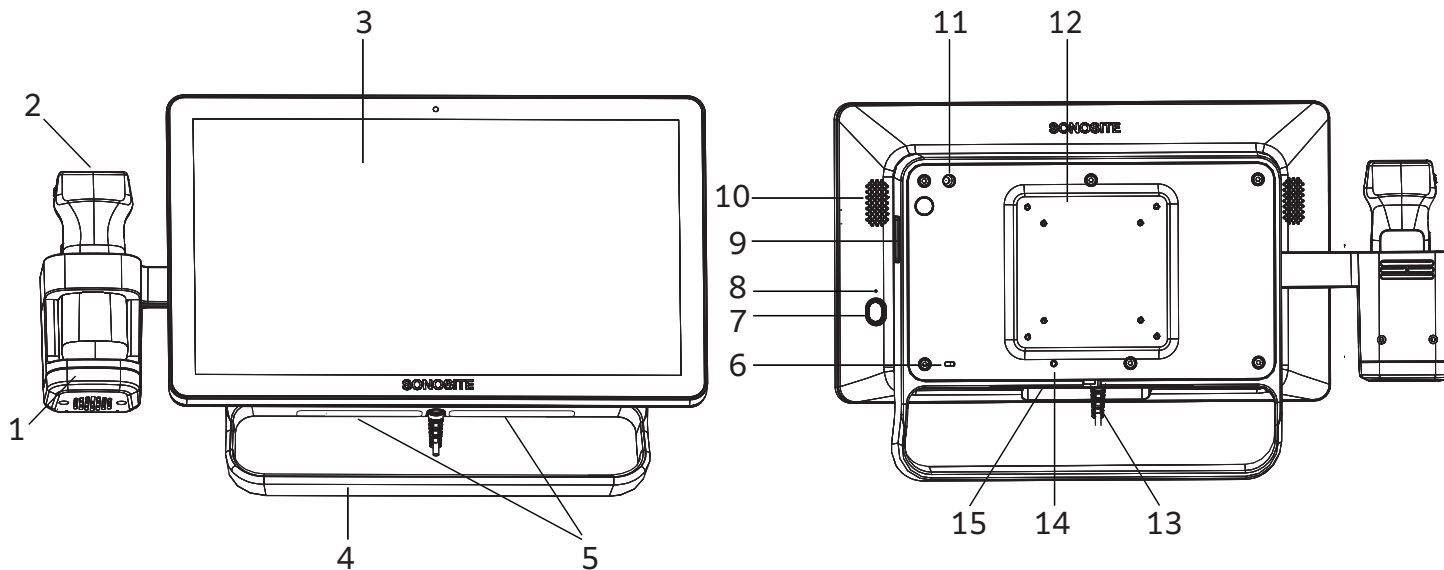

- | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Transduktorhållare med inbyggd laddare och fläkt | 4. Systemhandtag | 7. Strömbrytare | 10. Systemhögtalare | 13. Kabelanslutning |
| 2. Transduktor | 5. Systemetikett | 8. Återställningsknapp | 11. Tillbehörsport | 14. Laddningsindikator |
| 3. Klinisk bildskärm med pekskärm | 6. Kensington säkerhetsuttag | 9. USB-port | 12. VESA-gränssnitt | 15. Systemmikrofon |

Sonosite iLOOK Snabbguide

Huvudskärm för skanning

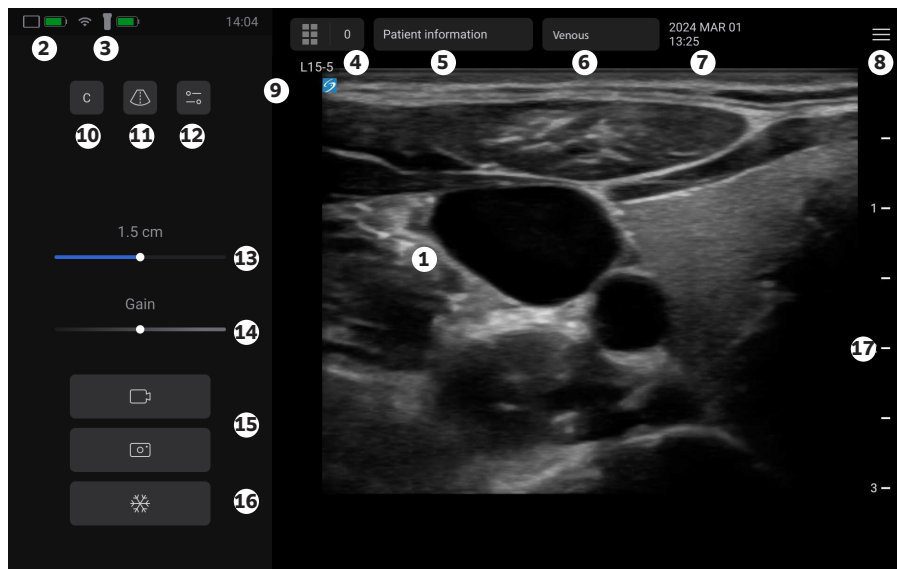

1. Ultraljudsbild
2. Bildskärmens batterinivå
3. Anslutningsstatus och batterinivå för transduktorn
4. Granskningsknapp
5. Patientuppgifter
6. Val av undersökningstyp
7. Datum och klockslag
8. Systemmeny
9. Orienteringsmarkör
10. Bildåtergivningslägen
11. Mittlinje
12. Kontrollpanel för bildåtergivning
13. Djupreglage
14. Gain- eller cine-kontroller
15. Knappar för att spara
16. Frys
17. Djupmarkör

Justering av djup, förstärkning och zoom

- För att minska eller öka djupet flyttar du skjutreglaget fram och tillbaka på pekskärmen.
- För att minska eller öka förstärkningen, flytta reglaget fram och tillbaka på pekskärmen.
När du skannar i färg justerar reglaget Gain färgförstärkningen.
- Justera zoom genom att föra fingerspetsarna utåt eller inåt på pekskärmen. Du kan dubbeltrycka på bilden för att återgå till den ursprungliga bildstorleken.

Mätningar och beräkningar

Frys bilden innan du slutför en mätning eller beräkning.

- Tryck på och justera mätmarkörerna på pekskärmen för att göra en avståndsmätning.
- För att beräkna CVR (förhållande mellan kateter och kärl) trycker du på **Vessel**

D (Fr) (Kärldiameter (CH)) eller **Vessel D (G)** (Kärldiameter (G)) och använder mätmarkörerna för att mäta diametern. Sedan väljer du kateterstorleken från rullgardinsmenyn.

- För att radera ett mått trycker du på eller **All** (Alla).

Spara och granska

- Tryck på för att spara en bild med alla aktuella mätningar som visas.
- Tryck på för att spara ett klipp. Klipp kan endast sparas på livebilder.
- När du vill granska bilder och klipp för den aktuella undersökningen trycker du på längst upp på skärmen och trycker sedan på en miniatyrbild för att visa en version i full storlek.
- Om du vill visa bilder och klipp från en tidigare undersökning trycker du på menyn och sedan på **Patient list**

(Patientlista). Tryck på för att visa sökskärmen, ange patient-ID, namn, eller undersökningsdatum och tryck på för att söka i listan. Tryck på önskad undersökning för att visa granskningssidan.

Avsluta och exportera

- Avsluta undersökningen medan skanning pågår genom att trycka på knappen **End study** (Avsluta studie) längst upp till höger på skärmen.
- Vill du avsluta undersökningen från en annan skärm trycker du på systemmenyn och sedan på **End study** (Avsluta studie).
- För export av data till ett USB-minne går du till **Patient list** (Patientlistan), väljer undersökningen och trycker på **Send to** (Skicka till) och sedan **USB**. Markera kryssrutan för att ta bort patientdata före export.



www.sonosite.com/contactus

Copyright © 2026 FUJIFILM SonoSite, Inc. Med ensamrätt.

Artikelnummer: P33249-02

06/2026

SONOSITE och SONOSITE-logotypen är varumärken och registrerade varumärken som tillhör FUJIFILM Sonosite i olika jurisdiktioner. FUJIFILM är ett registrerat varumärke som tillhör FUJIFILM Corporation i olika jurisdiktioner. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Sonosite iLOOK Hurtigveiledning

Lading av systemet

Lad systemet før bruk. Batteriladingen fullføres innen fire timer.

1. Se til at strømledningen er koblet til strømforsyningen og at kabelen i den andre enden av forsyningen er koblet til kontakten på baksiden av systemet.
2. Koble vekselstrømledningen til et vekselstrømmuttak av sykehuskvalitet.
3. Sett transduseren inn i transduserstativet med etikettsiden vendt mot baksiden av stativet der den trådløse laderen er plassert.

Slik slår du systemet på og av

- For å slå på skjermen kan du trykke og holde inne strømknappen på baksiden til skjermen lyser.
- For å slå på transduseren: Trykk og hold inne strømknappen nederst på transduseren. Strømindikatoren blinker blått.
- For å slå av skjermen kan du trykke og holde inne strømknappen. Trykk på **Power Off** (Slå av) når valgskjermbildet vises.
- For å slå av transduseren: Trykk og hold inne strømknappen i tre sekunder.

Logge på systemet

1. Skriv inn påloggingsopplysningene dine på påloggingssiden, eller velg **Guest mode** (Gjestemodus). Etter at du har logget inn på systemet, vises startskjermen.

2. Velg **Scan** (Skann) for å åpne skannemodus, **Help** (Hjelp) for tilgang til brukerveiledningen eller **Settings** (Innstillinger) for å konfigurere systemet.

Starte en undersøkelse

I skannemodus kan du koble til transduseren, legge inn pasientopplysninger og utføre undersøkelser.

Koble til transduseren

1. Sørg for at både transduseren og skjermen er påslått.
2. For å koble til en transduser for første gang må du trykke på systemmenyen ≡ på skanneskjermen.
3. Trykk på **Connect to transducer** (Koble til transduser) i systemmenyen.
4. Trykk på **Add transducer** (Legg til transduser), og trykk deretter på transduserens serienummer i listen.
5. Etter tilkobling blir transduserens indikatorlampe grønn (hvis batteriet er ladet), og skanneskjermen vises.

Innlegging av pasientinformasjon

1. Trykk på tekstfeltet for pasientopplysninger øverst på skjermen for å åpne skjermbildet med pasientopplysninger.
2. På pasientinformasjonsskjermen trykker du på hvert felt og skriver inn navn, ID, fødselsdato og kjønn.

Alle data som lagres under studien, er knyttet til pasienten.

Velge en undersøkelsestype


1. Øverst på skjermen trykker du på feltet undersøkelsestype for å vise en rullegardinmeny.
2. Velg en undersøkelsestype fra menyen.

Skanning

- 2D er standard modus. Trykk på **2D** for å gå tilbake til standardmodus.
- Trykk på **C** for å skanne i fargedoppler.
- For å fryse bildet, trykker du på .

Fargedoppler


- For å velge hvor fargeboksen skal vises på skjermen, trykk på  eller . Du kan også dra boksen direkte opp eller ned til disse posisjonene.
- Trykk på  for å vise kontrollpanelet for bildebehandling, og gjør deretter ett av følgende:
 - For å bytte fargetype, trykk på **CVD** (Color Velocity Doppler) eller **CPD** (Color Power Doppler).
 - Trykk på  eller  for å styre fargeboksen.
 - Trykk på **Low** (Lav), **Med** (Middels) eller **High** (Høy) for å justere fargeskalaen.

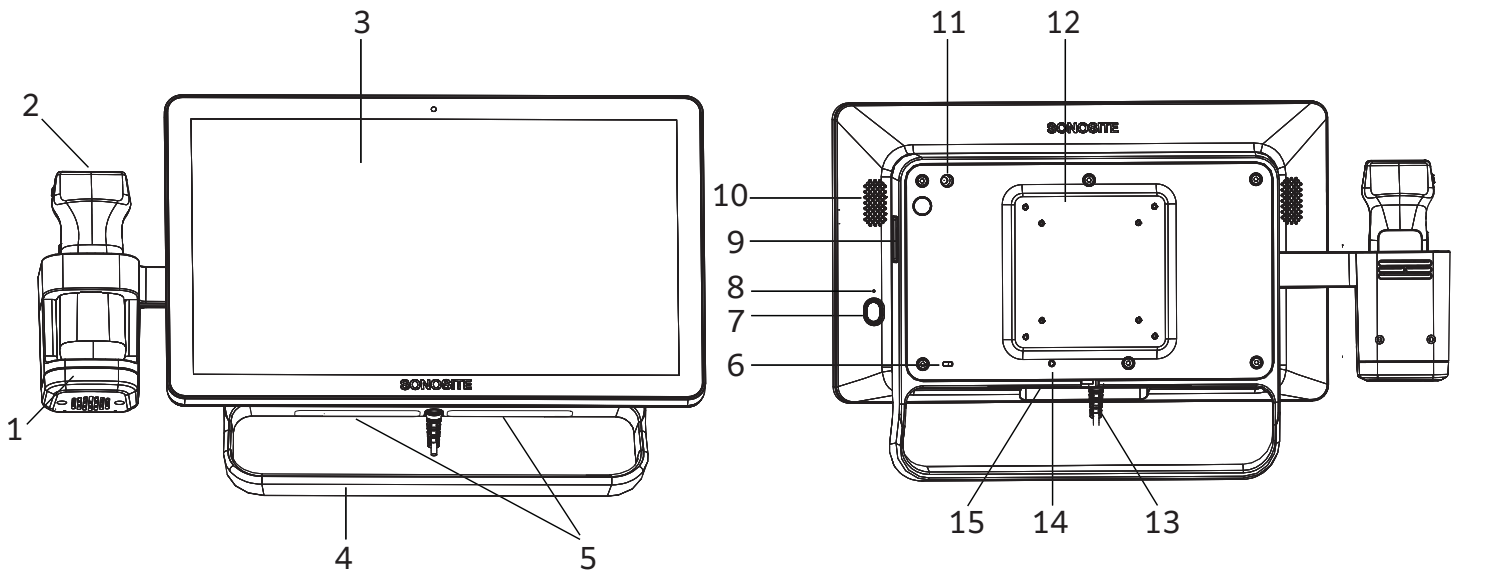

- | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Transduserholder med innebygd lader og vifte | 4. Systemhåndtak | 7. Strømknapp | 10. Systemhøytaler | 13. Kabelkontakt |
| 2. Transduser | 5. Systemetikett | 8. Tilbakestillingsknapp | 11. Tilbehørport | 14. Ladeindikator |
| 3. Klinisk skjerm med berøringsskjerm | 6. Kensington-sikkerhetsspor | 9. USB-port | 12. VESA-grensesnitt | 15. Systemmikrofon |

Sonosite iLOOK Hurtigveiledning

Hovedskjerm for skanning

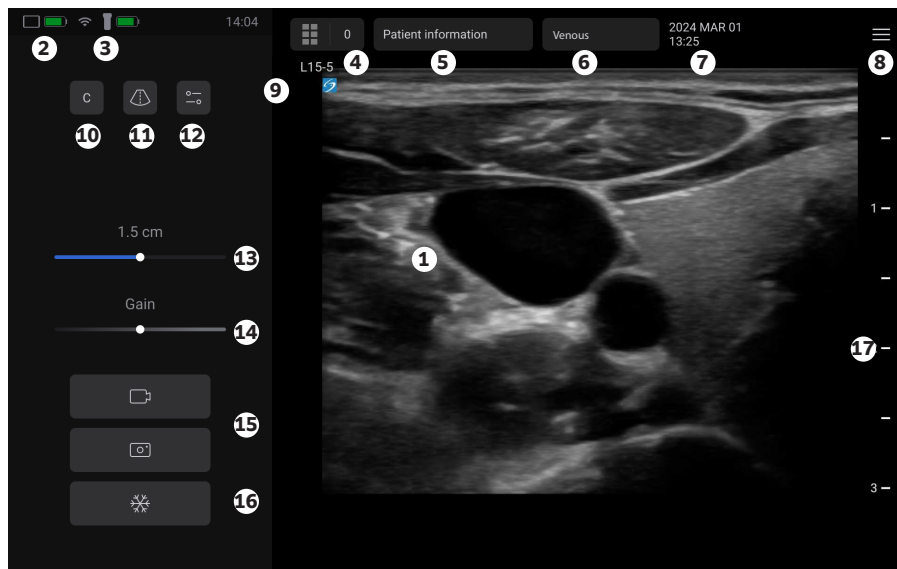

1. Ultralydbilde
2. Batterinivå på skjermen
3. Transduserens tilkoblingsstatus og batterinivå
4. Gjennomgangsknapp
5. Pasientinformasjon
6. Valg av undersøkelsestype
7. Dato og klokkeslett
8. Systemmeny
9. Retningsmarkør
10. Avbildningsmoduser
11. Midtlinje
12. Bildekontrollpanel
13. Dybdekontroll
14. Kontroller for gain (forsterkning) og cine (film)
15. Lagre-knapper
16. Freeze (Frys)
17. Dybdemarkør

Justering av dybde, forsterkning og zoom

- For å redusere eller øke dybden flytter du glidebryteren frem og tilbake på berøringsskjermen.
 - For å redusere eller øke forsterkningen, må du flytte glidebryteren frem og tilbake på berøringsskjermen.
- Når du skanner i farger, justeres fargeforsterkningen av skyveknappen for forsterkning.
- Juster zoomen ved å knipe fingrene fra hverandre eller sammen på berøringsskjermen. Du kan dobbeltklikke på bildet for å gå tilbake til den opprinnelige bildestørrelsen.

Målinger og beregninger

Frys bildet  før du fullfører en måling eller beregning.

- Trykk på  for å måle avstanden og juster målepunktene på berøringsskjermen.
- For å beregne CVR (kateter til beholder-forhold), trykk på **Vessel D (Fr)**

(Kardiameter (CH)) eller **Vessel D (G)** (Kardiameter (G)), bruk målepunktene til å måle diameteren, og velg deretter kateterstørrelsen fra rullegardinmenyen.

- For å slette en måling, trykk på  eller  **All** (Alle).

Lagring og gjennomgang

- Trykk på  for å lagre et bilde med de aktuelle målingene som vises.
- Trykk på  for å lagre et klipp. Klipp kan kun lagres på sanntidsbilder.
- For å se gjennom bilder og klipp til den aktuelle undersøkelsen, trykk på  øverst på skjermen og deretter på et hvilket som helst miniatyrbilde for å vise det i full størrelse.
- Hvis du ønsker å vise bilder og klipp fra en tidligere undersøkelse, trykker du på menyen  og deretter på **Patient list** (Pasientliste). Trykk på

 for å vise søkeskjermen, skriv inn pasient-ID, navn, eller undersøkelsesdato og trykk på  for å søke i listen. Trykk på ønsket undersøkelse for å vise gjennomgangssiden.

Avslutte og eksportere

- For å avslutte undersøkelsen under skanning, trykk på knappen **End study** (Avslutt undersøkelse) øverst til høyre på skjermen.
- For å avslutte undersøkelsen fra en annen skjerm, trykk på systemmenyen , og trykk deretter på **End study** (Avslutt undersøkelse).
- For å eksportere data til en USB-pinne, gå til **Patient list** (Pasientliste), velg undersøkelsen og trykk på **Send to** (Send til), og deretter **USB**. Merk av i boksen for å slette pasientdata før eksport.



www.sonosite.com/contactus

Opphavsrett © 2026 FUJIFILM SonoSite, Inc.
Med enerett.

Delenummer: P33249-02

06/2026

SONOSITE og SONOSITE-logoen er varemerker og registrerte varemerker for FUJIFILM Sonosite i ulike jurisdiksjoner. FUJIFILM er et registrert varemerke som tilhører FUJIFILM Corporation i forskjellige land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Sonosite iLOOK Hurtig vejledning

Opladning af systemet

Oplad systemet, før du bruger det. Batteriopladningen fuldføres i løbet af fire timer.

1. Sørg for, at netledningen er tilsluttet strømadapteren, og at kablet i den anden ende af adapteren er tilsluttet stikket på bagsiden af systemet.
2. Sæt strømledningen i en stikkontakt af hospitalskvalitet.
3. Sæt transduceren i transducerholderen med etiketsiden vendt mod bagsiden af holderen, hvor den trådløse oplader er placeret.

Tænde og slukke for systemet

- For at tænde skærmen skal du trykke på tænd-/sluk-knappen på bagsiden og holde den nede, indtil skærmen lyser.
- For at tænde transduceren skal du trykke på tænd-/sluk-knappen i bunden af transduceren og holde den nede. Strømindikatoren blinker blåt.
- For at slukke for skærmen skal du trykke på tænd-/sluk-knappen og holde den nede. Tryk på **Power Off** (Sluk), når valgskærmen vises.
- For at slukke transduceren skal du trykke på tænd-/sluk-knappen og holde den nede i tre sekunder.

Log på systemet

1. Indtast dine loginoplysninger på loginsiden, eller vælg **Guest mode** (Gæstetilstand).

Når du er logget ind på systemet, vises startskærmen.

2. Vælg **Scan** for at aktivere scanningstilstand, **Help** (Hjælp) for at få adgang til brugervejledningen, eller **Settings** (Indstillinger) for at konfigurere systemet.

Start af en undersøgelse

Scanningstilstand gør det muligt for dig at forbinde til transduceren, gå ind i patientoplysninger og udføre undersøgelser.

Tilslutning af transduceren

1. Sørg for, at både transduceren og skærmenheden er tændt.
2. Hvis du vil oprette forbindelse til en transducer for første gang, skal du trykke på systemmenuen  på scanningsskærmen.
3. Tryk på **Connect to transducer** (Opret forbindelse til transducer) i systemmenuen.
4. Tryk på **Add transducer** (Tilføj transducer), og tryk herefter på transducerens serienummer på listen.
5. Efter tilslutning lyser transducerens indikatorlampe grønt (hvis batteriet er opladet), og scanningsskærmen vises.

Indtastning af patientoplysninger

1. Tryk på tekstfeltet patientinformationer øverst på skærmen for at gå ind på skærmen med patientinformationer.

2. På skærmen patientinformationer skal du trykke på hvert felt og indtaste navn, id, fødselsdato og køn.

Alle data, som gemmes under undersøgelsen, tilknyttes patienten.

Valg af en undersøgelsestype


1. Øverst på skærmen skal du trykke på feltet undersøgelsestype for at få vist en rullemenu.
2. Vælg en undersøgelsestype i menuen.

Scanning

- 2D ist der Standardmodus. Tippen Sie auf **2D**, um zum Standardmodus zurückzukehren.
- Tryk på **C** for at scanne i farve-Doppler.
- Tryk på  for at fryse billedet.

Color Doppler (Farve-Doppler)


- Tryk på ,  eller  for at vælge farvefeltets placering på skærmen. Du kan også direkte trække feltet op eller ned for at justere disse placeringer.
- Tryk på  for at vise billedkontrolpanelet, og gør herefter en af følgende:
 - Tryk på **CVD** (Farvehastighedsdoppler) eller **CPD** (Farveamplitudedoppler) for at skifte farvetype.
 - Tryk på ,  eller  for at styre farvefeltet.
 - Tryk på **Low** (Lav), **Med** (Mellem) eller **High** (Høj) for at ændre farveskalaen.

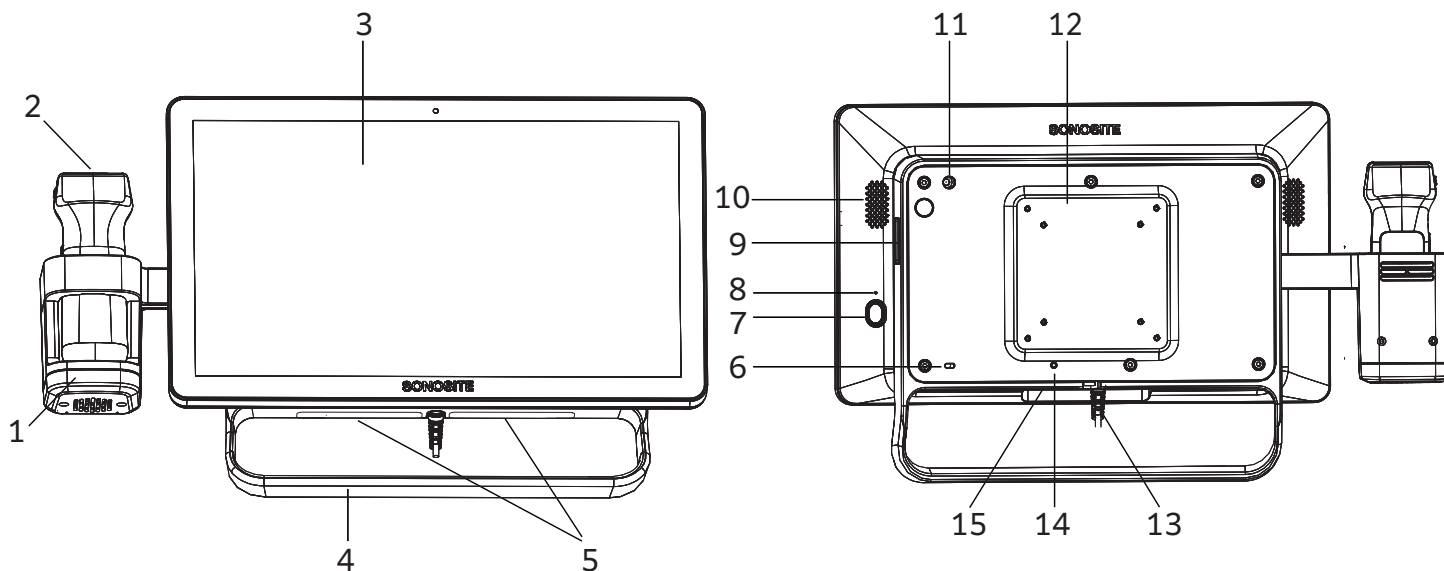

- | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Transducerholder med indbygget oplader og ventilator | 4. Systemhåndtag | 7. Tænd-/sluk-knap | 10. Systemhøjtaler | 13. Kabelstik |
| 2. Transducer | 5. Systemetiket | 8. Nulstillingsknap | 11. Tilbehørsport | 14. Opladningsindikator |
| 3. Klinisk skærm med berøringsskærm | 6. Kensington sikkerhedsslot | 9. USB-port | 12. VESA-grænseflade | 15. Systemmikrofon |

Sonosite iLOOK Hurtig vejledning

Hovedskærm for scanning

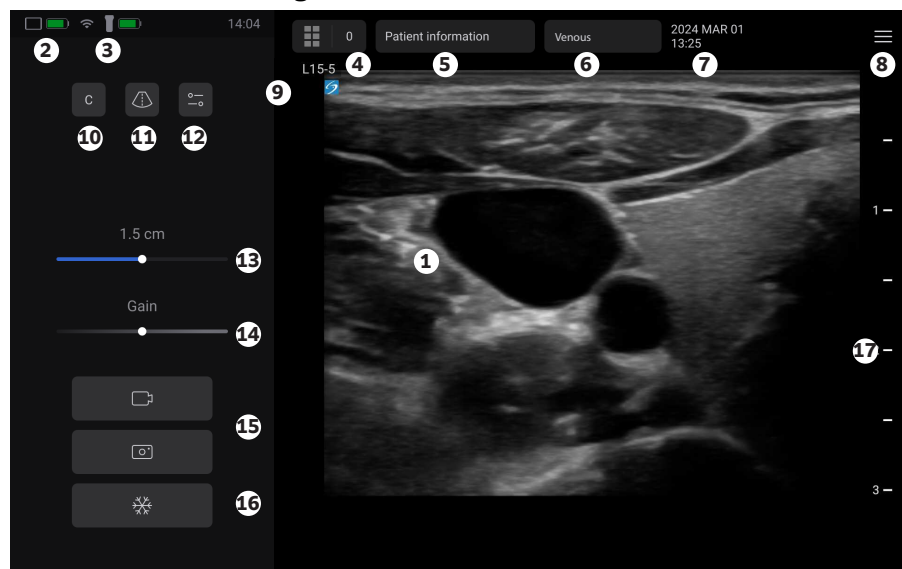

1. Ultralydsbillede
2. Skærmens batteriniveau
3. Transducerens forbindelsesstatus og batteriniveau
4. Gennemgangsknap
5. Patientoplysninger
6. Valg af undersøgelsestype
7. Dato og klokkeslæt
8. Systemmenu
9. Retningsmarkør
10. Billeddannelsestyper
11. Centerlinje
12. Billedkontrolpanelet
13. Dybdekontrol
14. Gain- eller filmstyring
15. Gem knapper
16. Frys
17. Dybdemarkør

Justering af dybde, forstærkning og zoom

- For at mindske eller øge dybden skal du flytte skyderen frem og tilbage på berøringsskærmen.
- For at øge eller mindske forstærkningen skal du flytte skyderen frem og tilbage på berøringsskærmen.
- Forstærkningsskyderen justerer farven, når der scannes i farver.
- Juster zoom ved at knibe ud eller ind på berøringsskærmen. Du kan dobbelttrykke på billedet for at vende tilbage til den oprindelige billedstørrelse.

Målinger og beregninger

- Frys billedet , før du afslutter en måling eller beregning.
- Tryk på  for at måle distance og justere målemarkørerne på berøringsskærmen.
 - Tryk på **Vessel D (Fr)** eller **Vessel D (G)** for at beregne CVR (kateter-

til-til-forhold), brug målemarkørerne til at måle diameteren, og vælg herefter kateterstørrelsen fra rullemenuen.

- Tryk på  eller  **All** (Alle) for at slette en måling.

Lagring og gennemgang

- Tryk på  for at gemme et billede med alle nuværende målinger vist.
- Tryk på  for at gemme et klip. Klip kan kun gemmes på live-billeder.
- Tryk på  for at gennemgå billeder og klip for den nuværende undersøgelse øverst på skærmen, og tryk herefter på ethvert miniaturebillede for at vise en version i fuld størrelse.
- Hvis du vil se billeder og klip fra en tidligere undersøgelse, skal du trykke på menuen  og derefter trykke på

Patient list (Patientliste). Tryk på  for

at få vist søgeskærmen, indtast patient-id, navn eller undersøgelsesdato, og tryk på  for at søge i listen. Tryk på den ønskede undersøgelse for at få vist gennemgangssiden.

Afslutning og eksport

- Tryk på knappen **End study** (Afslut undersøgelse) øverst til højre på skærmen for at afslutte undersøgelsen, mens du scanner.
- Tryk på systemmenuen  for at afslutte undersøgelsen fra en anden skærm, og tryk herefter på **End study** (Afslut undersøgelse).
- Gå til **Patient list** (Patientliste) for at eksportere data til en USB-enhed, vælg undersøgelsen, og tryk på **Send to** (Send til) herefter **USB**. Sæt kryds i afkrydsningsfeltet for at fjerne patientdata før eksport.



www.sonosite.com/contactus

Copyright © 2026 FUJIFILM SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Varenummer: P33249-02

06/2026

SONOSITE og SONOSITE-logoet er varemærker og registrerede varemærker tilhørende FUJIFILM Sonosite i forskellige retsområder. FUJIFILM er et registreret varemærke tilhørende FUJIFILM Corporation i forskellige jurisdiktioner. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.