

## Sonosite MT Guide rapide

### Mise sous tension du système

Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur la façade avant de l'appareil.

### Démarrage d'une étude

#### Nouveau patient

1. Appuyez sur **Entrer** depuis l'écran de démarrage ou + Nouveau patient sur le panneau tactile.
2. Saisie des informations patient.
3. Touchez **Scan** (Balayer) pour commencer la visualisation.

Toutes les données enregistrées au cours de l'examen sont liées au patient.

#### Types d'examens

1. Sélectionnez la sonde et le bouton d'examen.
2. Sélectionnez une sonde et un type d'examen.
3. Touchez deux fois le type d'examen ou touchez **Scan** (Balayer) pour commencer la visualisation.

#### Balayage

- Le mode 2D est le mode par défaut. Appuyez sur **2D** pour revenir au mode par défaut.

- Appuyez sur **M** pour passer en Mode M.
- Appuyez sur **C** pour passer en mode Doppler couleur.
- Appuyez sur **D** pour passer en mode Doppler.

#### Mode M

1. Positionnez la ligne M sur l'image 2D de l'écran tactile du moniteur.
2. Pour afficher à la fois l'image de la ligne M et le tracé en mode M, appuyez à nouveau sur **M**.
3. Appuyez sur l'image ou le tracé pour faire basculer les commandes entre elles.

#### Doppler couleur


1. Utilisez la commande **Type couleur** pour passer du Doppler couleur (CVD) au Doppler Puissance (CPD) ou du Doppler Couleur (CVD) à la Variance (Var) en fonction du type d'examen. Il se peut que vous deviez toucher **+ Plus de contrôles** sur le panneau tactile pour trouver la commande.

2. Positionnez la zone couleur en faisant glisser votre doigt sur l'écran tactile du moniteur.
3. Appuyez et faites glisser le cercle sur le coin pour contrôler la taille de la zone couleur.

#### Doppler

1. Utilisez la commande **Mode Doppler** pour passer du PW (Doppler pulsé) au CW (Doppler continu) et au TDI (Doppler tissulaire). Les imageries CW et TDI ne sont disponibles que pour l'examen cardiaque. Il se peut que vous deviez toucher **+ Plus de contrôles** pour trouver la commande.
2. Positionnez la ligne D et la porte sur l'image 2D de l'écran tactile du moniteur.
3. Pour afficher le tracé spectral, appuyez à nouveau sur **D**.
4. Appuyez sur l'image ou le tracé pour faire basculer les commandes entre elles.

### Moniteur clinique

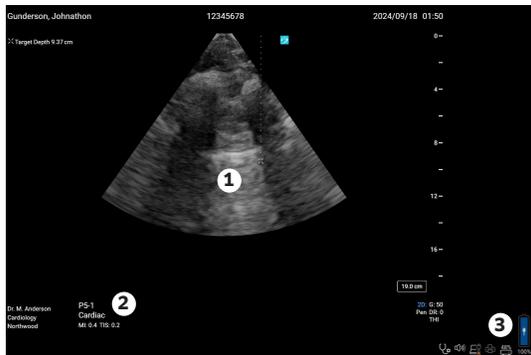

### Panneau tactile



### Légende

1. Moniteur clinique et écran tactile
2. Type d'examen
3. Niveau de charge de la batterie et connexions
4. Examen, patient et rapports
5. Menu de type d'examen transducteur
6. Commandes supplémentaires
7. Modes
8. Annotations, calculs et curseurs
9. Commandes Gain et Cine
10. Boutons d'enregistrement

### Façades avant et arrière de l'appareil



11. Bouton d'alimentation
12. Ports HDMI, ECG, Ethernet et d'alimentation

## Sonosite MT Guide rapide

### Gain

Réglez le gain en choisissant l'une des options suivantes :

- Réglez le curseur sur le panneau tactile.
- Appuyez sur **AUTO** sur le panneau tactile pour régler automatiquement le gain.

### Profondeur

- Utilisez le curseur du panneau tactile ou les boutons de profondeur ↑ et ↓.

### Geler, défiger une image et utiliser Ciné

1. Appuyez sur le bouton . L'affichage CINE (Ciné) apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran tactile du moniteur.
2. Pour parcourir les vues Ciné, faites glisser votre doigt horizontalement vers la droite ou vers la gauche de l'écran tactile du moniteur pour faire défiler les vues vers l'avant ou l'arrière. Pour effectuer un défilement vue par vue, appuyez sur  ou .
3. Pour quitter la pause, appuyez à nouveau sur le bouton .

### Zoom

#### Zoom sur image en direct

1. Appuyez sur **Zoom** sur le panneau tactile. Il se peut que vous deviez toucher **+ Plus de contrôles** sur le panneau tactile pour trouver la commande.
2. Positionnez la région de zoom en faisant glisser votre doigt sur l'écran tactile du moniteur.
3. Appuyez et faites glisser le cercle sur le coin pour contrôler la taille de la fenêtre de zoom.
4. Touchez à nouveau la commande pour effectuer un zoom.

### Zoom sur image gelée

1. Sur une image figée, appuyez sur **Zoom** sur le panneau tactile. Il se peut que vous deviez toucher **+ Plus de contrôles** sur le panneau tactile pour trouver la commande.
2. Touchez la commande vers le haut ou vers le bas pour régler l'agrandissement.
3. Déplacez l'image sur l'écran tactile du moniteur.

### Mesures et calculs

#### Mesures

1. Sur une image en temps réel ou figée, appuyez sur le bouton curseur .
2. Positionnez les curseurs par défaut sur l'écran tactile du moniteur ou sélectionnez une mesure différente sur le panneau tactile.
3. Appuyez sur un curseur sur l'écran tactile du moniteur pour passer d'un curseur à l'autre.

#### Calculs

1. Sur une image en temps réel ou figée, appuyez sur le bouton calcul  pour afficher des programmes d'analyse.
2. Naviguez jusqu'à une mesure sur le panneau tactile et sélectionnez-la.
3. Positionnez les curseurs sur l'écran tactile du moniteur.
4. Appuyez sur un curseur sur l'écran tactile du moniteur pour passer d'un curseur à l'autre.

### Annotations

1. Appuyez sur **ABC** pour afficher la page d'annotations.
2. Touchez **Texte**, **Picto** ou **Flèche** pour ajouter du texte, des pictogrammes ou des flèches à l'image.

3. Positionnez les annotations sur l'écran tactile du moniteur.

### Enregistrement et examen

- Appuyez sur le bouton  pour enregistrer l'image ainsi que les mesures et calculs en cours. Les calculs et mesures associés sont enregistrés dans le rapport du patient.
- Appuyez sur le bouton  pour enregistrer une séquence vidéo.
- Appuyez sur les vignettes pour accéder à l'écran d'examen ou sur **Liste patie.** (Liste des patients) pour afficher un autre examen. (Vous trouverez cette option sur le panneau tactile principal, au bas du formulaire du patient ou de rapport, ou dans le menu .)

### Fin et exportation

1. Terminez l'étude en touchant **FIN ÉTUDE.** Il est impossible d'exporter des examens en cours.
2. Insérez un dispositif de stockage USB dans un port USB de l'échographe ou du pupitre.
3. Touchez **Liste patie.** Sélectionnez un ou plusieurs examens à exporter.
4. Appuyez sur **Envoyer à**, puis sur **USB.**
5. Sélectionnez le lecteur USB dans la liste et choisissez si vous souhaitez inclure les informations relatives au patient.
6. Touchez **Exporter.**

### Aide et guides

- Appuyez sur un symbole  pour consulter l'aide embarquée ou appuyez sur **Aide** dans le menu système .
- Consultez la rubrique Guides pour visionner des vidéos de formation et de procédure.

P25658-01



#### FUJIFILM Sonosite, Inc

Siège mondial  
21919 30th Drive SE

Bothell, WA 98021-3904  
Tél : +1 (425) 951 1200  
ou +1 (877) 657 8050  
Fax : +1 (425) 951 6800  
[www.sonosite.com](http://www.sonosite.com)

FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Australie. . . . . +300 663 516  
FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd : Nouvelle-Zélande. . +0800 888 204  
FUJIFILM Sonosite Brésil . . . . . +55 11 5574 7747  
FUJIFILM Sonosite Canada Inc. . . . . +1 888 554 5502  
FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd . . . . . +86 21 5010 6000  
FUJIFILM Sonosite GmbH : Allemagne . . . . . +49 69 80 88 40 30  
FUJIFILM Sonosite, Inc.-États-Unis . . . . . +1 425 951 1200

#### Bureaux Sonosite internationaux

FUJIFILM Sonosite India Pvt Ltd. . . . . +91 124 288 1100  
FUJIFILM Sonosite Iberica SL-Espagne. . . . . +34 91 123 84 51  
FUJIFILM Medical Co., Ltd.-Japon . . . . . +81 3 0418 7190  
FUJIFILM Sonosite Korea Ltd. . . . . +65 6380 5589  
FUJIFILM Sonosite Ltd-Royaume-Uni . . . . . +44 1462 341 151  
FUJIFILM Sonosite SARL : France. . . . . +33 182 880 702