




Présentation

Cet Aide-mémoire sert de référence et de rappel exclusivement et n'est pas destiné à remplacer le Guide d'utilisation livré avec votre système SonoSite X-Porte. Pour plus de détails concernant les procédures, les descriptions, les fonctionnalités et les précautions de sécurité, reportez-vous au *Guide d'utilisation SonoSite X-Porte*, disponible à l'adresse www.sonosite.com.

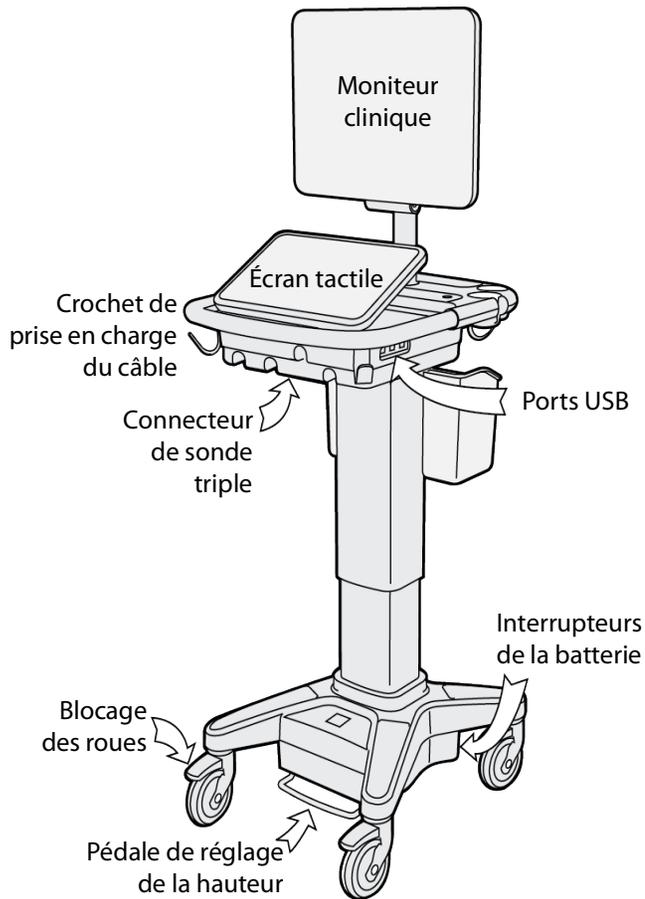

Exemple de panneau de contrôle de l'écran tactile :

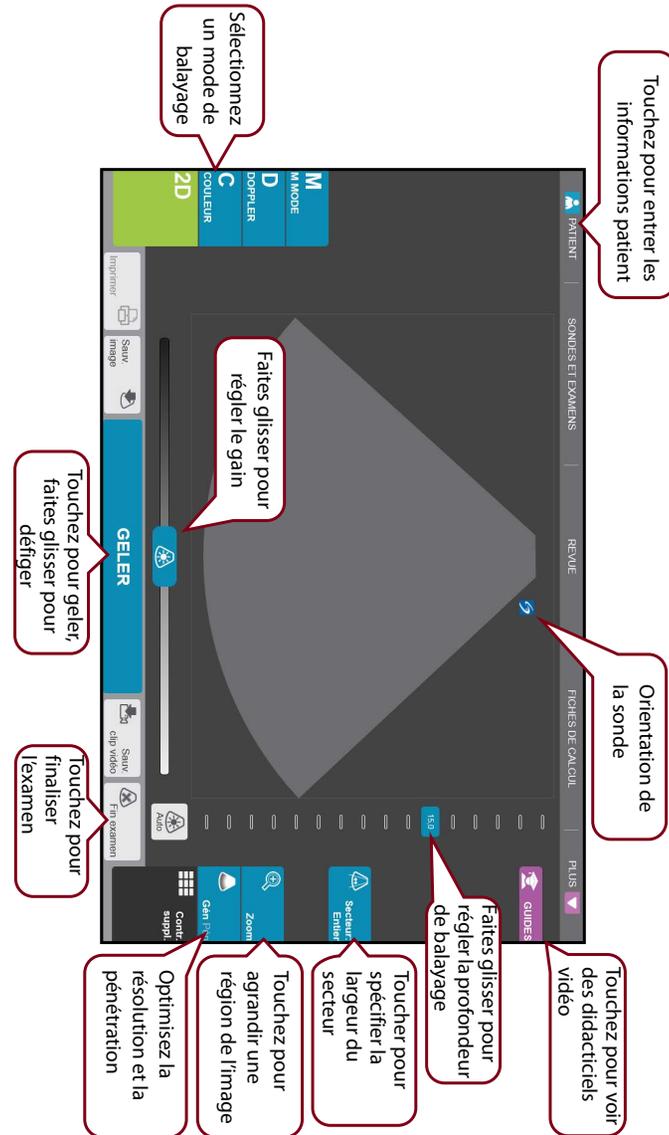

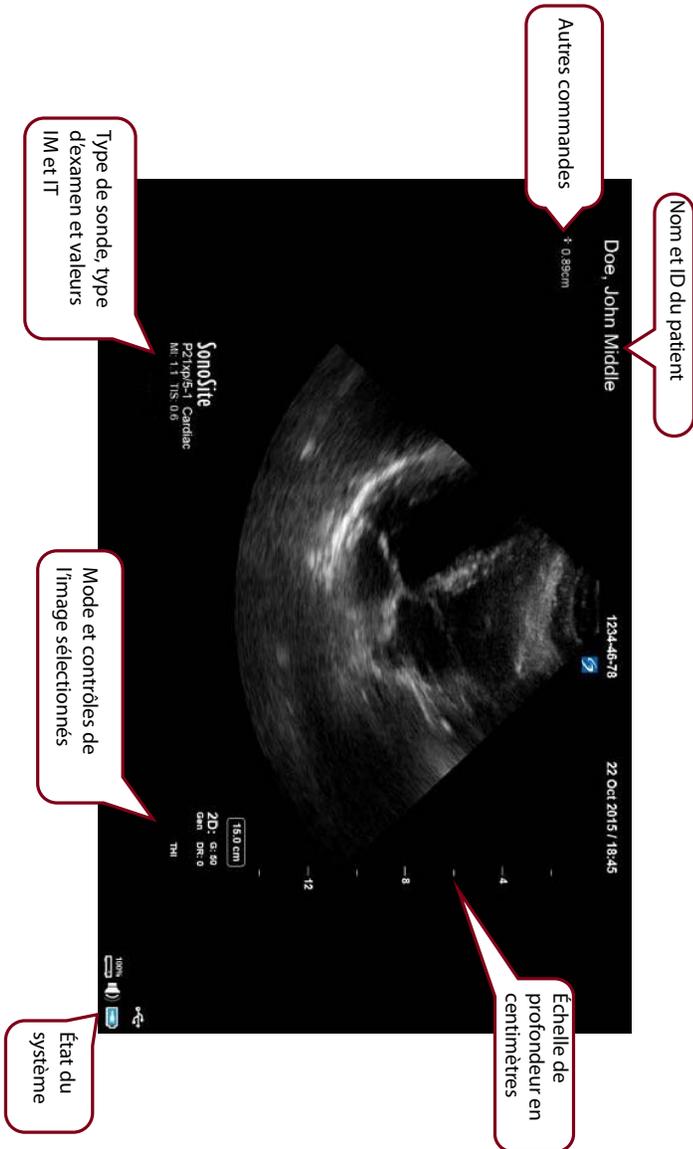

Exemple de moniteur clinique :

Avant le balayage

Si un contrôle dont vous avez besoin n'apparaît pas sur l'écran, touchez **Autres commandes** pour faire apparaître un menu des contrôles. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite faire glisser les contrôles vers les emplacements vides à droite pour qu'ils apparaissent sur l'écran principal.



Branchement des sondes

- 1 Sur le connecteur de sonde, relevez le verrou et faites-le pivoter dans le sens horaire.
- 2 Ajustez bien le connecteur dans le port en bas de l'unité.
- 3 Tournez la poignée du verrou vers la gauche.
- 4 Sécurisez le connecteur au système en appuyant sur le verrou.

Vérification de la charge de la batterie

- Les icônes dans la zone d'état du système sur le moniteur clinique montrent l'état de l'alimentation et de la batterie.
- Le système émet un bip pour vous prévenir que la charge de la batterie est inférieure à 14 %.

Balayage

Balayage simple

- 1 Au démarrage, touchez **Balay.** **Utilisation de la sonde et de l'examen par défaut.**
- 2 Pour finaliser l'examen, touchez **Fin examen.**



Balayage spécifique au patient

- 1 Au démarrage, touchez **Entrée Infos patient.**
- 2 À l'aide du clavier sur l'écran, entrez les informations pertinentes relatives au patient et touchez **Quitter.**




Modes d'imagerie

- **Par défaut** – Mode de balayage basique en 2D.
- **Mode M** – Affiche les mouvements dans l'image en 2D. Généralement utilisé pour mesurer les structures du cœur.
- **Couleur** – La région située dans la zone affiche le flux sanguin en couleur. Généralement utilisé pour montrer la présence et la direction du flux sanguin.
- **Doppler** – Affiche un spectre de vitesses de flux au fil du temps. Généralement utilisé pour afficher tout type de mouvement, y compris le flux sanguin et le mouvement des tissus.

Balayage

Types d'examen

- 1 Au démarrage, touchez **Sélect. Sonde et examen.**
- 2 Sous la sonde que vous souhaitez utiliser, touchez le type d'examen que vous souhaitez effectuer, puis touchez **Balay.**

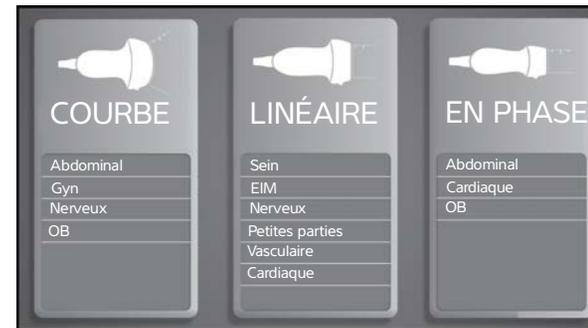

Enregistrement vers un port DVR

- 1 Insérez une clé USB dans le port DVR.
- 2 Touchez **Enreg.**
- 3 Touchez **Enreg.** à nouveau pour arrêter d'enregistrer.

Annotation d'une image

- 1 Touchez **Annotation**, et soit vous entrez le texte en haut du formulaire, soit vous choisissez une annotation standard dans la liste. Vous pouvez également toucher **Picto** pour choisir à partir d'une liste d'annotations graphiques.
- 2 Touchez **Quitter** puis faites glisser l'annotation à l'emplacement souhaité sur l'image.

Conseils d'utilisation de l'interface de l'écran tactile

Gestes

- **Balayer** – Faire défiler des pages et des images, se diriger vers la ligne D et la zone de couleur.
- **Faire glisser** – Changer la profondeur ; ajuster le gain ; déplacer les boutons, les curseurs et les annotations.
- **Toucher** – Sélectionner les modes, les écrans et les outils.
- **Pincer et agrandir** – Avec deux doigts, zoomer ou agrandir une image ou un scan Doppler en couleur.

Geler et Défiger

Avec deux doigts, touchez l'écran deux fois rapidement.

Gain et profondeur

Ajustez le gain et la profondeur en faisant glisser les curseurs associés.

Zoom

- 1 Touchez **Zoom**.
- 2 Faites glisser la zone de zoom vers un emplacement sur l'écran.
- 3 Avec deux doigts, pincez ou élargissez la zone de zoom jusqu'à la taille souhaitée.
- 4 Touchez deux fois la zone de zoom pour agrandir la région sélectionnée.

Mesure

Mesure d'une distance

- 1 Sur une image gelée, touchez **Distance**.
- 2 Faites glisser le curseur jusqu'au premier point.
- 3 Faites glisser le second curseur jusqu'au second point.

Mesure de la fréquence cardiaque

- 1 Sur un tracé en Mode M ou en faisant défiler en mode Doppler, touchez **Fréq. card**.
- 2 Faites glisser le curseur sur le pic du battement cardiaque.
- 3 Faites glisser le second curseur sur le pic du battement cardiaque suivant.

Affichage des calculs

- Pour afficher une liste des calculs, touchez **Calculs**.
- Pour afficher une liste des calculs de soins courts, touchez **Soins courts**.

Gestion des images et des clips

Revue

Touchez **Revue** pour voir les images et les clips dans l'examen actuel, ou touchez **Liste patie.** pour voir un examen différent.

Annotation

- 1 Touchez **Autres commandes**, puis touchez **Annotation**.
- 2 Touchez **Texte**, puis entrez le texte de la nouvelle annotation en haut du formulaire.
- 3 Touchez **Quitter**, puis faites glisser l'annotation à l'emplacement souhaité sur l'image.

Exportation

Vous pouvez enregistrer un examen, y compris des images et des clips, vers une clé USB pour un export simple.

- 1 Insérez une clé USB dans un port USB du dispositif.
- 2 Touchez **Revue**, puis **Liste patie**.
- 3 Sélectionnez un examen terminé à exporter. Il est impossible d'exporter des examens ouverts.
- 4 Touchez **Export USB**.
- 5 Sélectionnez une clé USB dans la liste et choisissez si vous souhaitez inclure les informations relatives au patient.
- 6 Touchez **Export** (Exporter).

Impression

Affichez l'image puis touchez **Imprimer**.

Informations de contact

Tél. (États-Unis ou Canada) : +1 (877) 657-8118

Tél. (hors États-Unis et Canada) : +1 (425) 951-1330 ou contactez votre représentant local

Fax : +1 (425) 951-6700

E-mail : ffss-service@fujifilm.com

Site Internet : www.sonosite.com

Fabricant

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 États-Unis
Tél. : 1-888-482-9449 ou
1-425-951-1200
Fax : 1-425-951-1201

Représentant agréé dans la CE

FUJIFILM SonoSite B.V.
Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam,
Pays-Bas

Représentant en Australie

FUJIFILM SonoSite
Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Australie

X-Porte, SonoSite et le logo SonoSite sont des marques de commerce ou des marques déposées de FUJIFILM SonoSite, Inc. dans diverses juridictions.

Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Copyright © 2019 FUJIFILM SonoSite, Inc. Tous droits réservés.



P22411-04

