




Översikt

Den här snabbguiden är endast avsedd som referens och för uppfriskning av minnet. Den är inte avsedd att användas istället för den användarhandbok som levererades tillsammans med SonoSite X-Porte-systemet. Mer ingående information om procedurer, beskrivningar, funktioner och säkerhetsåtgärder finns i SonoSite X-Porte Användarhandbok, som finns på www.sonosite.com.

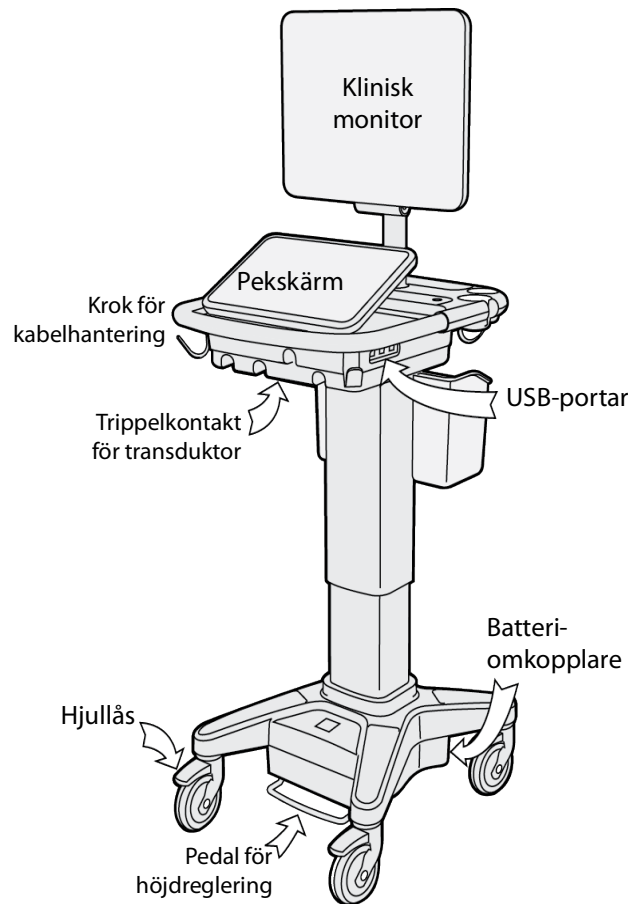

Exempel på kontrollpanel på pekskärmen:

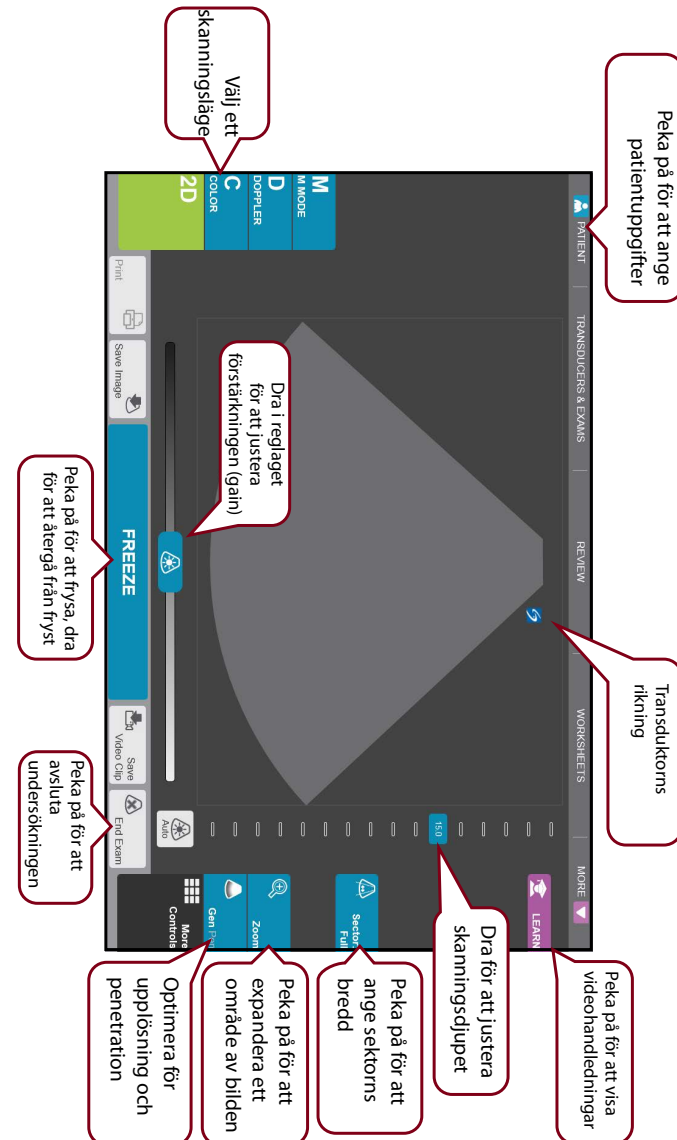

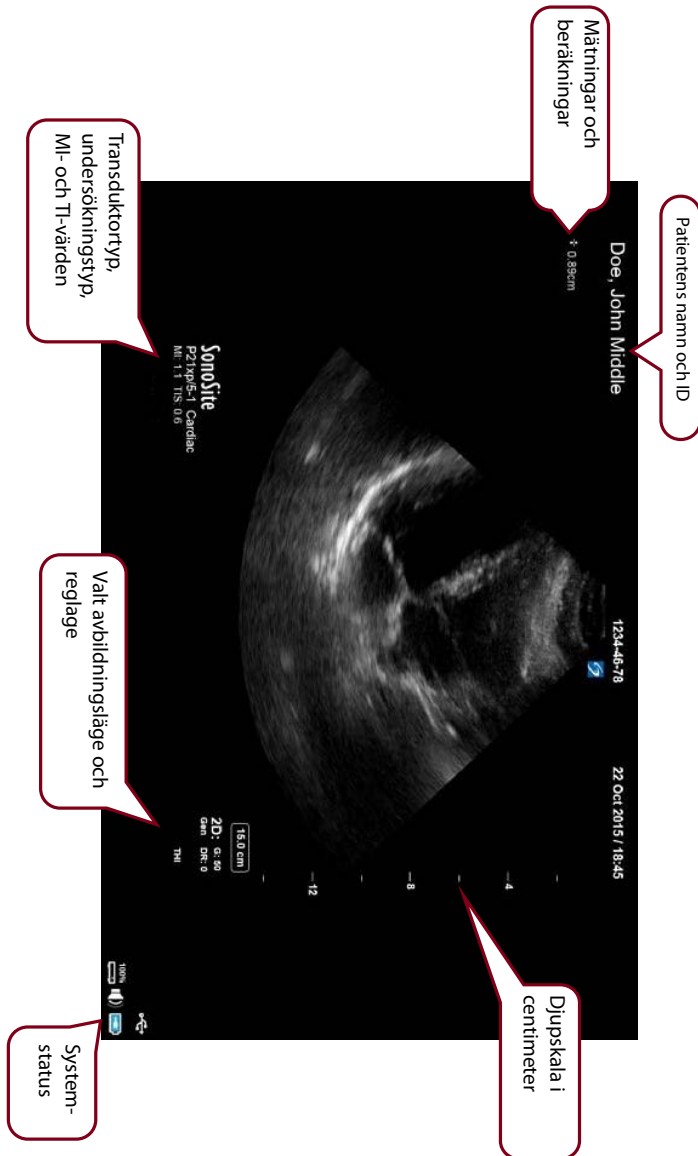

Exempel klinisk monitor:

Innan du skannar

Om ett reglage som du behöver inte visas på skärmen, peka på **More Controls** (Fler reglage) för att visa en meny med fler reglage. Därifrån går det att dra reglagen till tomma platser på högra sidan så att de visas på huvudskärmen.



Ansluta transduktorer

- 1 Dra upp spärren på transduceranslutningen och vrid den medurs.
- 2 Sätt in kontakten stadigt i porten på enhetens undersida.
- 3 Vrid spärrhandtaget moturs.
- 4 Fäst kontakten på systemet genom att trycka spärren uppåt.


Kontrollera batteriladdning

- Ikoner i området för systemstatus på den kliniska monitorn visar status för strömanslutning och batteri.
- När batteriladdningen är under 14 % piper systemet för att varna.

Skanning


Enkel skanning

- 1 Efter uppstart, peka på **Scan using default transducer and exam** (Skanna med standardtransduktor och förinställd undersökning).
- 2 Avsluta undersökningen genom att peka på **End Exam** (Avsluta undersökning).

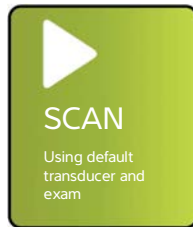

Patientspecifik skanning

- 1 Vid uppstart, peka på **Enter patient info** (Ange patientuppgifter).
- 2 Använd skärmtangentbordet för att skriva in relevanta patientuppgifter och peka på **Done** (Klar).

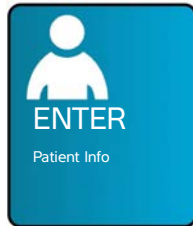


Bildåtergivningenslägen

- **2D** (Standard) – Grundläggande skanningsläge 2D
- **M Mode** (M-läge) – Visar rörelser i 2D-bilden. Används ofta för att mäta rörelser hos strukturer i hjärtat.
- **Color** (Färg) – Området inom den markerade rutan visar blodflödet i färg. Används oftast för att visa förekomst av och riktning för blodflöde.
- **Doppler** – Visar ett spektrum av flödes hastigheter över tid. Används ofta för att visa alla typer av rörelser, inklusive blodflöde och vävnadsrörelser.

Skanning

Undersökningstyper

- 1 Vid uppstart, peka på **Select Transducer and Exam** (Välj transduktor och undersökning).
- 2 Under den transduktor som ska användas, peka på den typ av undersökning som du vill utföra och peka sedan på **Scan** (Skanna).

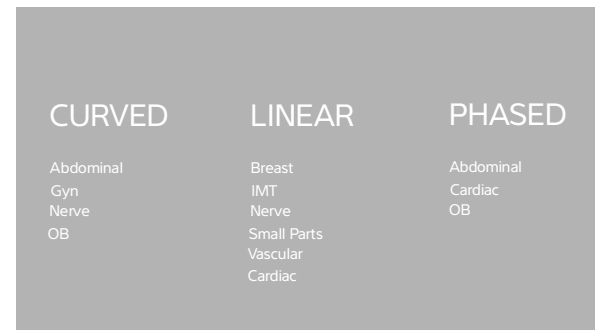

Spela in till DVR-port

- 1 Sätt in ett USB-minne i DVR-porten.
- 2 Peka på **Rec** .
- 3 Peka på **Rec** (Spela in) igen för att avbryta inspelningen.

Märka en bild

- 1 Peka på **Label** (Märkning) och skriv in text antingen i formulärets överkant, eller välj en standardetikett i listan. Du kan även peka på **Picto** (Piktogram) för att välja från en lista med grafiska etiketter.
- 2 Peka på **Done** (Klar) och dra etiketten till den önskade placeringen på bilden.

Tips om hur pekskärmen används

Gester

- **Svep** – Bläddra sidor och bilder, styr D-linjen och färgrutan.
- **Dra** – Ändra djup, justera förstärkning, flytta på knappar, mätmarkörer och etiketter.
- **Peka** – Välj lägen, skärmar och verktyg.
- **Skjut ihop och sprid ut** – Använd två fingrar för att zooma in eller expandera en bild eller en färgdopplerskanning.

Frys bild och återgå från fryst bild

Använd två fingrar och knacka snabbt två gånger på skärmen.

Förstärkning och djup

Justera förstärkning och djup genom att dra i respektive reglage.

Zooma

- 1 Peka på **Zoom** (Zooma).
- 2 Dra zoomrutan till önskad plats på skärmen.
- 3 Använd två fingrar och skjut ihop eller sprid ut zoomrutan till önskad storlek.
- 4 Peka snabbt två gånger på zoomrutan för att expandera det valda området.

Mätning

Mätning av avstånd

- 1 Peka på **Distance** (Avstånd) på en fryst bild.
- 2 Dra mätmarkören till den första punkten.
- 3 Dra den andra mätmarkören till den andra punkten.

Mäta hjärtfrekvens

- 1 Peka på **Heart Rate** (Hjärtfrekvens) på en fryst M-mode-registrering eller rullande dopplerregistrering.
- 2 Dra mätmarkören till toppen på hjärtslaget.
- 3 Dra den andra vertikala mätmarkören till toppen på nästa hjärtslag.

Visa beräkningar

- Visa en lista över beräkningar genom att peka på **Calcs** (Beräkningar).
- Visa en lista över akutvårdsberäkningar genom att peka på **Acute Care** (Akutvård).

Hantera bilder och klipp

Granska

Peka på **Review** (Granska) för att se bilderna och videoklippen för den aktuella undersökningen, eller peka på **Patient List** (Patientlista) för att granska en annan undersökning.

Märkning

- 1 Peka på **More Controls** (Fler reglage) och peka sedan på **Label** (Märkning).
- 2 Peka på **Text** och skriv sedan in texten för den nya etiketten i formulärets övre del.
- 3 Peka på **Done** (Klar) och dra etiketten till den önskade placeringen på bilden.

Exportera

Det går att spara en undersökning, inklusive bilder och videoklipp, på en USB-sticka för enkel export.

- 1 Sätt i ett USB-minne i en USB-port på enheten.
- 2 Peka på **Review** (Granska) och sedan på **Patient List** (Patientlista).
- 3 Välj en avslutad undersökning att exportera. Öppna undersökningar kan inte exporteras.
- 4 Peka på **Export USB** (Exportera USB).
- 5 Välj USB-minnet från listan och välj om patientinformationen ska inkluderas eller ej.
- 6 Peka på **Export** (Exportera).

Skriva ut

Peka på **Print** (Skriv ut) med bilden visad.

Kontaktinformation

Telefon (USA eller Kanada): +1-877-657-8118

Telefon (utanför USA och Kanada): +1-425-951-1330 eller ring en lokal representant.

Fax: +1-425-951-6700

E-post: ffss-service@fujifilm.com

Webb: www.sonosite.com

Tillverkare

FUJIFILM SonoSite, Inc.
21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 USA
Tfn: +1-888-482-9449 eller
+1-425-951-1200
Fax: +1-425-951-1201

Auktoriserad representant i EU

FUJIFILM SonoSite B.V.
Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam
Nederländerna

Sponsor i Australien

FUJIFILM SonoSite
Australasia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road
BROOKVALE, NSW, 2100
Australien

X-Porte, SonoSite och SonoSite-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör FUJIFILM SonoSite, Inc., i vissa jurisdiktioner.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Copyright© 2019 FUJIFILM SonoSite, Inc. Med ensamrätt.

P25793-02



CE
2797