

FUJIFILM

SonoSite iViz

Mobilità.
Chiarezza.
Connettività.



SonoSite iViz

Produttore

FUJIFILM SonoSite, Inc.

21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 USA

T: +1-888-482-9449 o
+1-425-951-1200

F: +1-425-951-1201

Rappresentante autorizzato CE

FUJIFILM SonoSite B.V.

Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam,
Paesi Bassi

Sponsor per l'Australia

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd

114 Old Pittwater Road
BROOKVALE,
NSW, 2100 Australia

FUJIFILM

SONOSITE e MIZ sono marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati di FUJIFILM SonoSite, Inc. in varie giurisdizioni. FUJIFILM è un marchio di fabbrica e un marchio di fabbrica registrato di FUJIFILM Corporation in varie giurisdizioni. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Copyright © 2019 FUJIFILM SonoSite, Inc. Tutti i diritti riservati.



Leggere il manuale dell'utente iViz per informazioni importanti sulla sicurezza.

CE
2797


P21830-04



FUJIFILM


SonoSite iViz

Guida
rapida

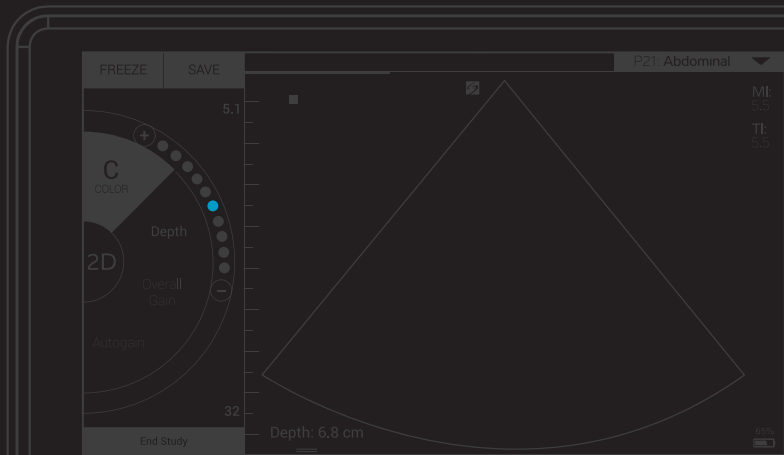


Contenuto della confezione:

- Unità flash 2-in-1 micro USB (64 GB)
- Custodia protettiva con maniglia e basamento
- Batteria iViZ
- Caricabatteria USB
- Caricabatteria con adattatore di alimentazione

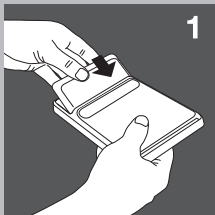


1 Installazione della batteria

Inserire la batteria nel sistema iViZ. Per informazioni sulla ricarica della batteria, consultare il capitolo Operazioni preliminari del *manuale dell'utente di iViZ*.

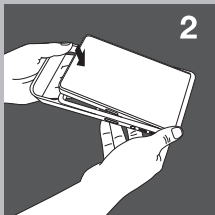


2 Collocazione del sistema nella custodia protettiva

- a Inserire il sistema in un'estremità della custodia.
- b Portare le estremità opposte della custodia sul sistema per tenerlo in posizione.

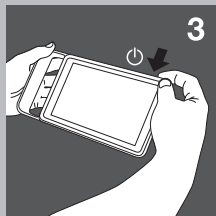


3 Prima accensione del sistema iViz

- a Premere il pulsante **Power** (Alimentazione), attendere alcuni secondi l'accensione di iVIZ, quindi scorrere sull'icona di **Blocco**.
- b Toccare **Learn** (Impara) per vedere un elenco di video iViz. Guardare **Esplorazione di iViz** per un breve tour del sistema.
- c Poiché iVIZ è diverso da qualsiasi altro sistema per ecografica, si consiglia vivamente di guardare anche gli altri video.
- d Accertarsi di impostare la data e l'ora corrette. Controllare regolarmente la data e l'ora, soprattutto se il sistema non è stato utilizzato per oltre due settimane.

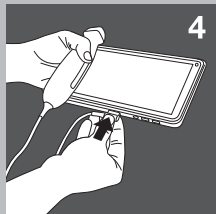

4 Collegamento del trasduttore

Inserire il connettore del trasduttore nella parte inferiore del sistema iVIZ (assicurarsi che il connettore del trasduttore sia rivolto lontano dagli altri connettori) fino a quando non si percepisce uno scatto.

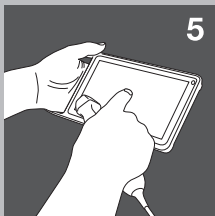


5 Esplorazione di iViz

Dalla schermata home di iViz:

- Toccare **Patient** (Paziente) per inserire le informazioni del paziente o visualizzare l'elenco dei pazienti.
- Toccare **Scan** (Scansione) per iniziare la scansione.
- Toccare **Learn** (Impara) per guardare i video o imparare le tecniche di ecografia.

Fare riferimento al capitolo Operazioni preliminari del *manuale dell'utente di iViz* (che si trova sul modulo **Learn** (Impara), l'unità flash USB e all'indirizzo www.sonosite.com) per informazioni sull'interazione generale e sull'uso dei gesti, come pizzicare e zoomare.

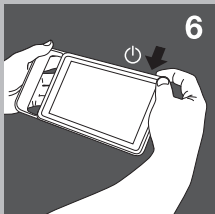

6 Spegnimento di iViz

a Tenere premuto il pulsante di **alimentazione**.

b Al prompt, toccare **Power off** (Spegni) e quindi **OK**.

Per mettere iVIZ modalità di sospensione, premere brevemente il pulsante **Power** (Accensione).