

FUJIFILM

SonoSite iViz

Mobilidade,
Clareza,
Conectividade.



SonoSite iViz

Fabricante

FUJIFILM SonoSite, Inc.

21919 30th Drive SE

Bothell, WA 98021 EUA

Tel.: +1-888-482-9449 ou
+1-425-951-1200

Fax: +1-425-951-1201

FUJIFILM

SONOSITE e MIZ são marcas comerciais e marcas registradas da FUJIFILM SonoSite, Inc. em diversas jurisdições. FUJIFILM é uma marca comercial e marca registrada da FUJIFILM Corporation em diversas jurisdições. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos detentores.

Copyright © 2019 FUJIFILM SonoSite, Inc. Todos os direitos reservados.

Representante autorizado na
Comunidade Europeia

FUJIFILM SonoSite B.V.

Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdã,
Países baixos

Patrocinador na Austrália

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd

114 Old Pittwater Road

BROOKVALE,

NSW, 2100 Austrália



Leia o *Guia de Usuário do
Miz* para obter informações
importantes sobre segurança.

CE
2797


P21831-04



FUJIFILM


SonoSite iViz

Manual de Início Rápido

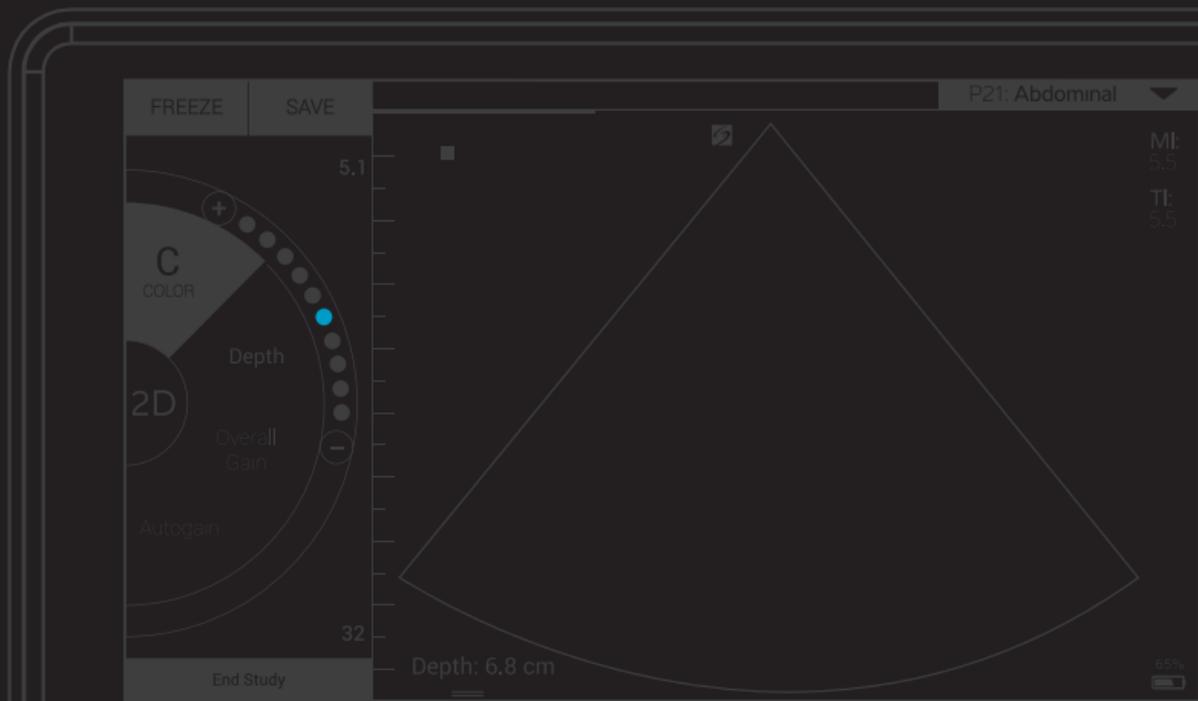


Conteúdo da caixa:

- Unidade Flash micro USB 2 em 1 (64 GB)
- Estojo protetor com alça e suporte
- Bateria iViz
- Carregador USB
- Carregador de bateria com compartimento e adaptador de energia

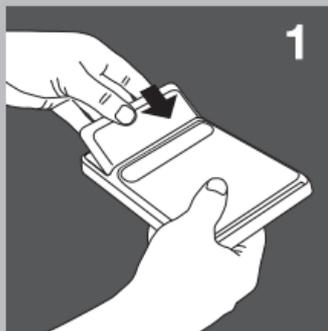


1 Instale a bateria

Insira a bateria no sistema iViz. Para obter informações sobre como carregar a bateria, consulte o capítulo Introdução do *Guia do Usuário do iViz*.

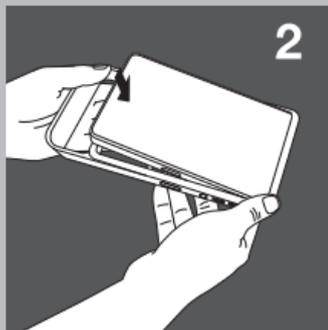


2 Coloque o sistema no estojo protetor

- Insira o sistema em uma extremidade do estojo.
- Envolva o sistema com as extremidades opostas do estojo para posicioná-lo no lugar.

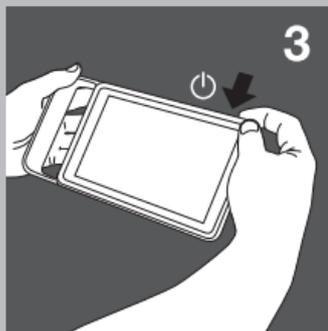

3 Ligue o iViz pela primeira vez


- a Pressione o botão **Power** (Ligar), espere alguns segundos para o iViz ligar e, em seguida, mova para cima o ícone **Lock** (Travar).
- b Toque em **Learn** (Saiba mais) para ver uma lista de vídeos do iViz. Assista **Explorando o iViz** para fazer um tour rápido pelo sistema.
- c Como o iViz é diferente de qualquer outro sistema de ultrassom, recomendamos veementemente que você assista aos outros vídeos de instrução.
- d Certifique-se de configurar a data e a hora corretas. Regularmente, verifique a data e a hora, especialmente após o sistema não ter sido usado por mais de duas semanas.

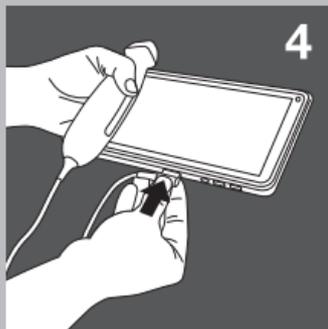

4 Conecte o transdutor

Insira o conector do transdutor na parte inferior do sistema iViz (certifique-se de que o conector do transdutor esteja apontando para fora dos outros conectores) até ouvir um clique.

SonoSite iViz

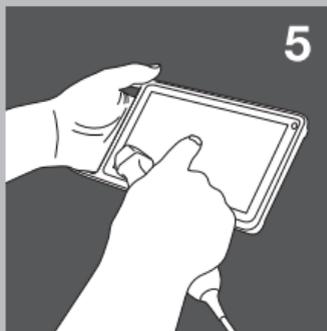


5 Explore o iViz

A partir da tela inicial do iViz:

- Toque em **Patient** (Paciente) para inserir as informações do paciente ou visualizar a lista de pacientes.
- Toque em **Scan** (Varrer) para iniciar a varredura.
- Toque em **Learn** (Saiba mais) para assistir aos vídeos de instrução ou saber mais sobre as técnicas de ultrassom.

Consulte o capítulo Introdução do *Guia do Usuário do iViz* (localizado no módulo **Learn** (Saiba mais), na unidade flash USB e no site www.sonosite.com) para obter informações sobre a interação geral e o uso de gestos, como 'pinçar' e 'zoom'.

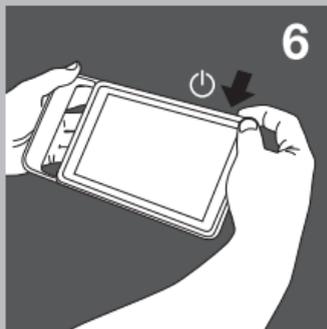

6 Desligue o iViz

a Pressione e segure o botão **Ligar**.

b Quando solicitado, toque em **Power off** (Desligar) e, em seguida, em **OK**.

Para colocar o Modo de suspensão, pressione brevemente o botão **Power** (Ligar).