

FUJIFILM

SonoSite iViz

移动。
清晰。
连通。



SonoSite iViz

制造商

FUJIFILM SonoSite, Inc.

21919 30th Drive SE

Bothell, WA 98021 美国

电话: 1-888-482-9449 或
1-425-951-1200

传真: 1-425-951-1201

欧盟授权代表

FUJIFILM SonoSite B.V.

Joop Geesinkweg 140

1114 AB Amsterdam,
荷兰

澳大利亚赞助商

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd

114 Old Pittwater Road

BROOKVALE,
NSW, 2100 澳大利亚

FUJIFILM

SONOSITE、SONOSITE 标志和 MIZ 是 FUJIFILM SonoSite, Inc. 在不同司法管辖区的商标和注册商标。FUJIFILM 是 FUJIFILM Corporation 在不同司法管辖区的商标和注册商标。所有其他商标为其各自所有者的财产。

版权所有 © 2019 FUJIFILM SonoSite, Inc. 保留所有权利。



请阅读《iViz 用户指南》
了解重要的安全信息。

CE
2797


P22814-03



FUJIFILM


SonoSite iViz

快速
入门
指南

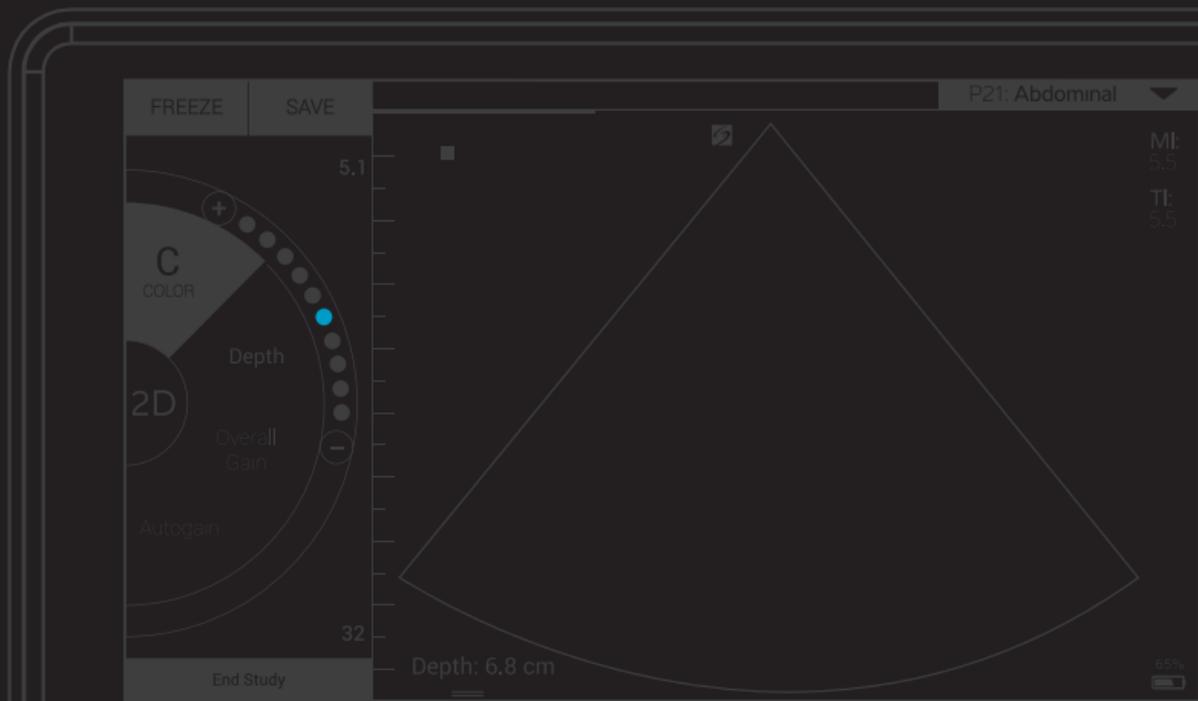


包装盒内容物：

- 二合一微型 USB 闪存盘 (64 GB) • 带手柄和单撑的保护壳 • iViz 电池
- USB 充电器 • 带电源适配器的电池座充电器

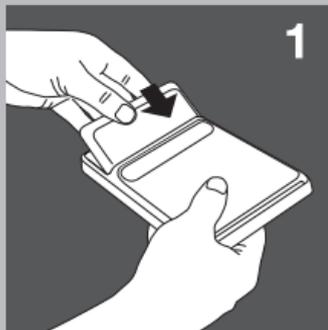


1 安装电池

将电池插入 iViz 系统。有关对电池充电的信息，请参阅《iViz 用户指南》的“入门”章节。

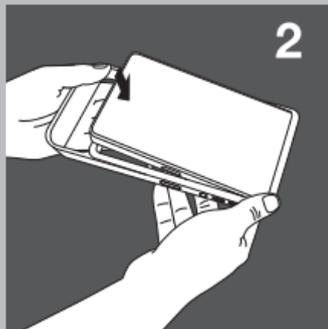


2 将系统放入保护壳

- a 将系统插入保护壳的一端。
- b 将保护壳的另一端搭在系统上以使系统固定就位。

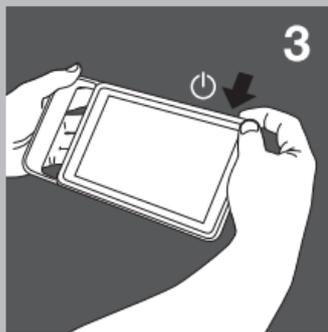

3 首次启动 iViz


- 按下 **Power**（电源）按钮，等几秒钟让 iViz 通电，然后在锁定图标上向上滑动。
- 轻触 **Learn**（学习）以查看 iViz 视频列表。观看 **Exploring iViz**（浏览 iViz）以快速浏览系统。
- 由于 iViz 与任何其他超声系统不同，我们强烈建议您也观看其他入门视频。
- 确保设置正确的日期和时间。定期检查日期和时间，特别是在未使用系统超过两周后。

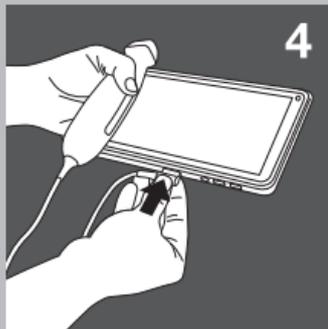

4 连接换能器

将换能器连接器插入 iViz 系统底部（确保换能器连接器远离其他连接器）直到听到咔哒声。

SonoSite iViz

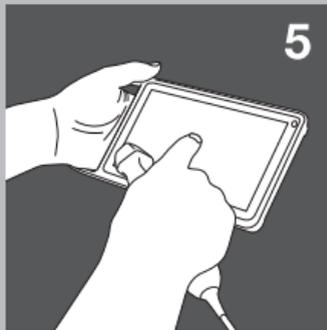


5 浏览 iViz

在 iViz 主屏幕上：

- 轻触 **Patient**（患者）以输入患者信息或查看患者列表。
- 轻触 **Scan**（扫描）以开始扫描。
- 轻触 **Learn**（学习）以观看入门视频或学习超声技术。

请参阅《iViz 用户指南》的“入门”章节（位于 **Learn**[学习]模块、USB 闪存盘和 www.sonosite.com 中），了解有关一般互动和使用手势（如捏拉缩放）的信息。

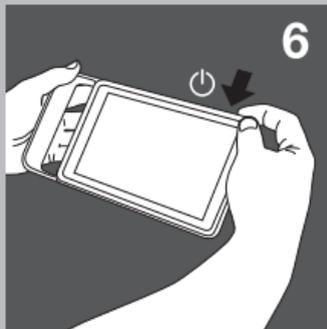

6 关闭 iViz

a 按住 **Power**（电源）按钮。

- b 出现提示时，轻触 **Power off**（关机），然后按 **OK**（确定）。
- 要使 iViz 进入休眠模式，短按 **Power**（电源）按钮。