

FUJIFILM

SonoSite iViz

Movilidad.  
Claridad.  
Conectividad.



# SonoSite iViz

## Fabricante

**FUJIFILM SonoSite, Inc.**  
21919 30th Drive SE  
Bothell, WA 98021 EE. UU.

**Tel.:** +1-888-482-9449 o  
+1-425-951-1200

**Fax:** +1-425-951-1201

## FUJIFILM

SONOSITE e iVIZ son marcas comerciales registradas y no registradas de FUJIFILM SonoSite, Inc. en diversas jurisdicciones. FUJIFILM es una marca comercial registrada y no registrada de FUJIFILM Corporation en diversas jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Copyright © 2019 FUJIFILM SonoSite, Inc. Reservados todos los derechos.

## Representante autorizado en la CE

**FUJIFILM SonoSite B.V.**  
Joop Geesinkweg 140  
1114 AB Ámsterdam,  
Países Bajos

## Patrocinador de Australia

**FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd**  
114 Old Pittwater Road  
BROOKVALE,  
NSW, 2100 Australia



Lea el *Manual para el usuario de iViz* para obtener información importante sobre seguridad.

CE  
2797


P21829-04



FUJIFILM


SonoSite iViz

Guía de  
referencia  
rápida

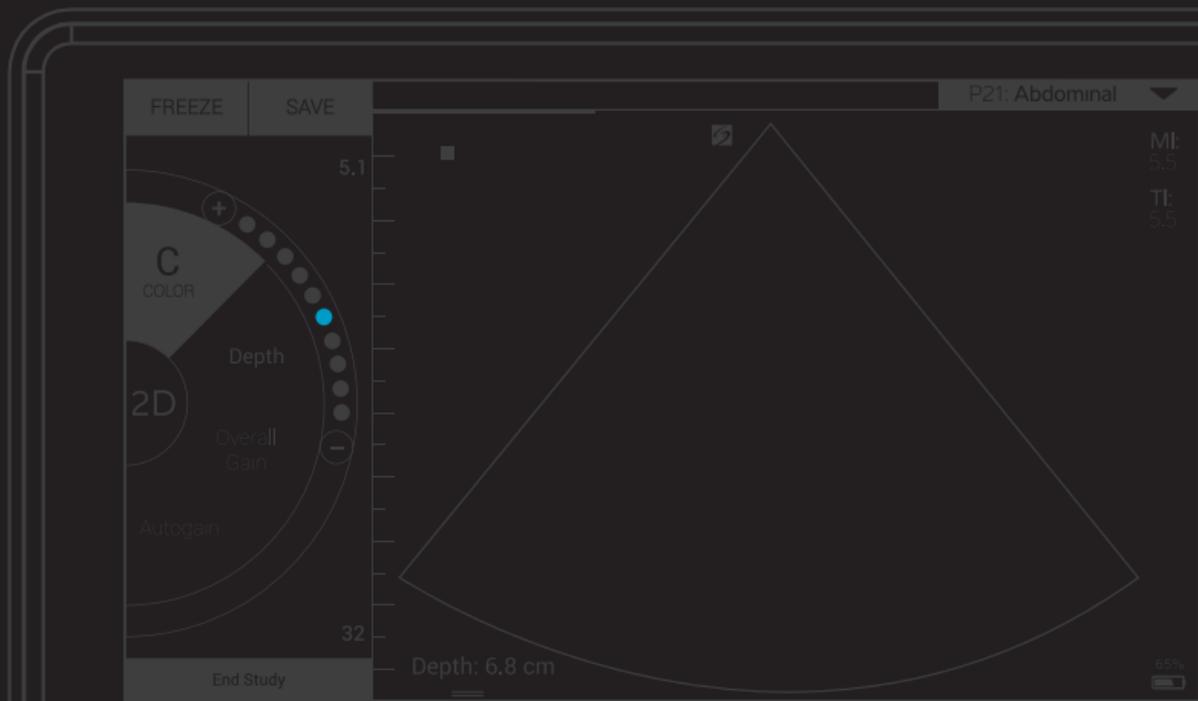


Contenido de la caja:

- Unidad USB micro flash 2 en 1 (64 GB)
- Estuche protector con asa y soporte
- Batería para iViz
- Cargador USB
- Cargador de puerto de batería con adaptador de corriente

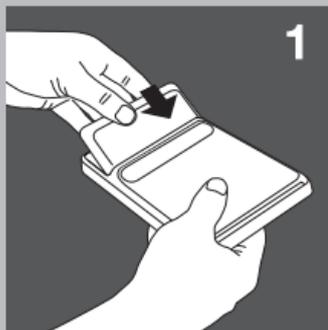


## 1 Instalación de la batería

Inserte la batería en el sistema iViz. Para obtener más información acerca de la carga de la batería, consulte el capítulo sobre conceptos básicos del *Manual para el usuario de iViz*.

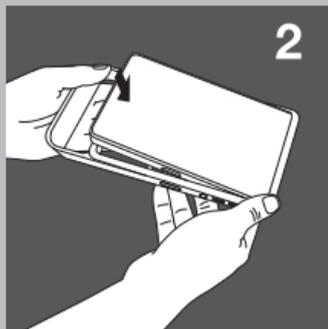


## 2 Colocación del sistema en el estuche protector

- Inserte el sistema en un extremo del estuche.
- Coloque el extremo opuesto del estuche sobre el sistema para situarlo en su sitio.

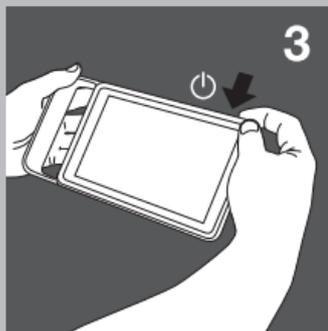


### 3 Primer encendido de iViz

- a Pulse el botón de **Power** (encendido/apagado), espere unos segundos a que se encienda iViz y, a continuación, deslice el dedo hacia arriba sobre el icono de **bloqueo**.
- b Toque **Learn** (Aprender) para ver una lista de vídeos sobre iViz. Vea **Navegación por iViz** para obtener una descripción rápida del sistema.
- c Como iViz no se parece a ningún otro sistema de ecografía, le recomendamos encarecidamente que vea también los otros vídeos de instrucciones.
- d Asegúrese de configurar la fecha y hora correctas. Compruebe con regularidad la fecha y hora, especialmente cuando el sistema lleve más de dos semanas sin usarse.

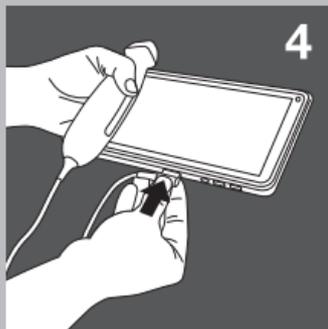

### 4 Conexión del transductor

Inserte el conector del transductor en la parte inferior del sistema iViz (asegúrese de que el conector del transductor está orientado lejos del resto de conectores) hasta que escuche un chasquido.

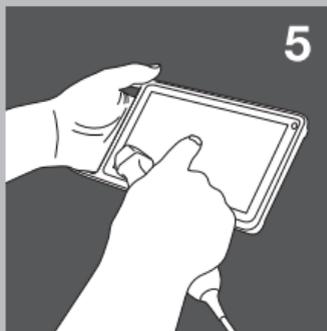


## 5 Navegación por iViz

Desde la pantalla de inicio de iViz:

- Toque **Patient** (Paciente) para introducir información sobre el paciente o ver la lista de pacientes.
- Toque **Scan** (Explorar) para empezar a realizar exploraciones.
- Toque **Learn** (Aprender) para ver los vídeos de instrucciones o conocer técnicas ecográficas.

Consulte el capítulo sobre conceptos básicos del *Manual para el usuario de iViz* [situado en el módulo **Learn** (Aprender), la unidad flash USB y [www.sonosite.com](http://www.sonosite.com)] para obtener información sobre la interacción general y el uso de gestos, como los de reducción y zoom.

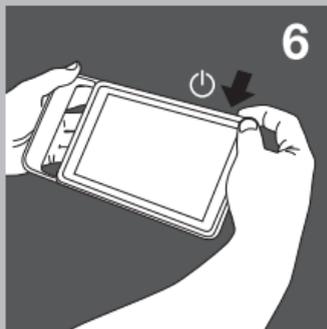

## 6 Apagado de iViz

**a** Mantenga pulsado el botón de **encendido/apagado**.

**b** Cuando se le solicite, toque **Power off** (Apagar) y, a continuación, **OK** (Aceptar).

Para pasar el sistema iViz al modo de latencia, pulse brevemente el botón de **Power** (encendido/apagado).