

FUJIFILM

SonoSite iViz

Rörlighet.
Tydlighet.
Anslutbarhet.



SonoSite iViz

Tillverkare

FUJIFILM SonoSite, Inc.

21919 30th Drive SE
Bothell, WA 98021 USA

Tfn: +1-888-482-9449 eller
+1-425-951-1200

Fax: +1-425-951-1201

FUJIFILM

SONOSITE och iVIZ är varumärken och registrerade varumärken som tillhör FUJIFILM SonoSite, Inc. i olika jurisdiktioner. FUJIFILM är ett varumärke och registrerat varumärke som tillhör FUJIFILM Corporation i olika jurisdiktioner. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Copyright © 2019 FUJIFILM SonoSite, Inc. Med ensamrätt.

Auktoriserad representant i EU

FUJIFILM SonoSite B.V.

Joop Geesinkweg 140
1114 AB Amsterdam,
Nederländerna

Sponsor i Australien

FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd

114 Old Pittwater Road
BROOKVALE,
NSW, 2100 Australien

CE
2797

P22810-03




Läs iViz användarhandbok för
viktig säkerhetsinformation.



FUJIFILM


SonoSite iViz

Snabb-
guide

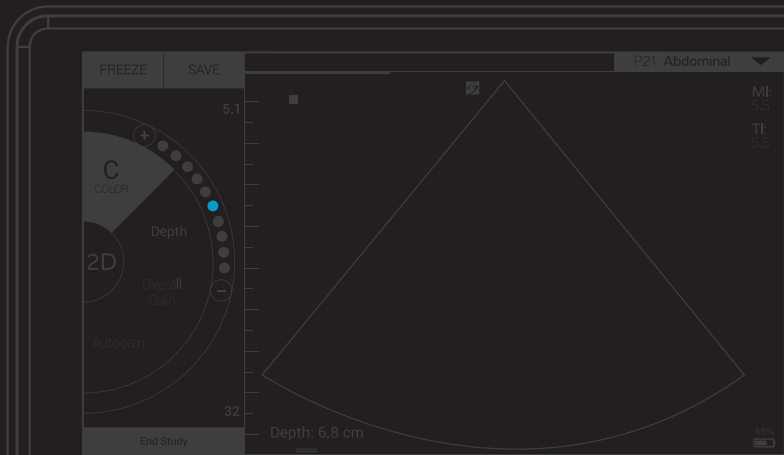


Förpackningens innehåll:

- 2-i-1 mikro USB-minne (64 GB)
- Skyddsfodral med handtag och stöd
- iViz-batteri
- USB-laddare
- Batterifacksladdare med strömadapter

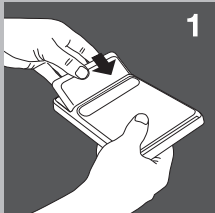


1 Sätta i batteriet

För in batteriet i iViz-systemet. Information om laddning av batteriet finns i kapitlet Komma igång i *iViz användarhandbok*.

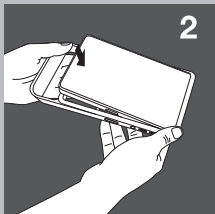


2 Ta ut systemet ur skyddsfodralet

- För in systemet i den andra änden av fodralet.
- För den motsatta änden av fodralet över systemet för att hålla det på plats.

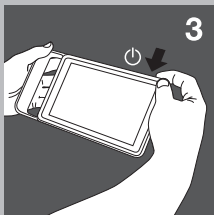

3 Starta iViz första gången


- a Tryck på knappen **Strömbrytare** och vänta några sekunder på att iViz startar och svep sedan upp på ikonen **Lås**.
- b Peka på **Learn** (Lära) för att se en lista med iViz-videor. Titta på **Exploring iViz** (Utforska iViz) för en snabb information om systemet.
- c Eftersom iViz i inte liknar något annat ultraljudssystem, rekommenderar vi starkt att du också tittar på de andra två hur-göra-videorna.
- d Se till att datum och tid ställs in korrekt. Kontrollera regelbundet datum och tid, särskilt om systemet inte använts under mer än två veckor.

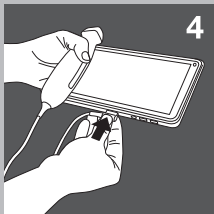

4 Ansluta transduktorn

För in transduktorns kontakt på undersidan av iViz-systemet (se till att transduktorns kontakt är riktad bort från de andra anslutningarna) tills du hör ett klick.

SonoSite iViz

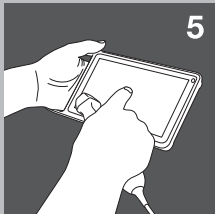


5 Utforska iViz

Från iViz startskärm:

- Peka på **Patient** för att ange patientinformation eller visa patientlistan.
- Peka på **Scan** (Skanna) för att börja skanna.
- Peka på **Learn** (Lära) för att titta på hur-göra-videorna eller lära dig ultraljudstekniker.

Läs kapitlet Komma igång i *iViz användarhandbok* (finns i modulen **Learn** (Lära), i USB-minnet och på www.sonosite.com) för information om allmän interaktion och användning av gester, såsom klämma och zooma.

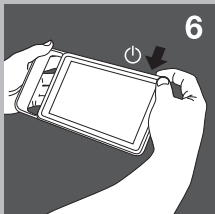

6 Stänga av iViz

- a Tryck på och håll ned knappen **Strömbrytare**.
- b Peka på **Power off** (Stäng av) efter anmodan och sedan på **OK**.
För att placera iViz i viloläge, tryck kort på knappen **Strömbrytare**.